


Manual de referencia rápida de la guía transperineal reutilizable para transductor EV29L

1. Reprocesamiento antes del primer uso y de cada uso posterior


- A. Separe todas las piezas y deseche las bandas Kraton.
- B. Limpieza Cidezyme (5 minutos)
 - Utilice un cepillo adecuado para las piezas de la guía de aguja.
 - Enjuague todas las piezas, incluyendo las ranuras, el riel y los canales usando para ello un limpiador.
- C. Esterilización
 - Esterilización: Autoclave de clase B
 - 134 °C (273 °F) durante 3 min, tiempo de secado: 45 min
 - 132 °C (270 °F) durante 4 min, tiempo de secado: 45 min
 - Alternativa a la esterilización (si no se dispone de autoclave): desinfección de alto nivel con Cidex OPA durante 12 minutos
 - Enjuague todas las ranuras, el riel y los canales usando para ello un desinfectante.
 - Durante la desinfección, pase una toallita o paño suave por la superficie de la guía para eliminar las burbujas que puedan quedar.
- D. Inspección tras el reprocesamiento (ausencia de grietas visibles, cambio de color o daños).

2. Ensamblaje


- A. Seleccione la placa calibre adecuada para el procedimiento y colóquela en la torre de la guía de aguja.
- B. Fije la placa calibre a la torre de la guía de aguja utilizando la banda Kraton suministrada.
- C. Inserte la torre de la guía de aguja/placa calibre en el riel del tapón de la guía de aguja.
- D. Prepare el transductor EV29L con una funda. Inserte la guía de aguja (montada) en el canal de la propia guía de aguja del transductor EV29L hasta que encaje en su sitio. Opcional: Envuelva una banda Kraton alrededor del transductor y fíjela a la clavija situada en el lateral del tapón de la guía de aguja.

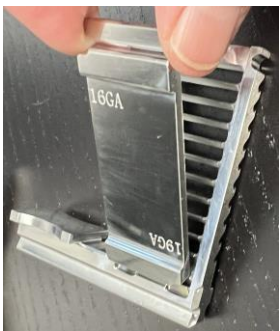


2A

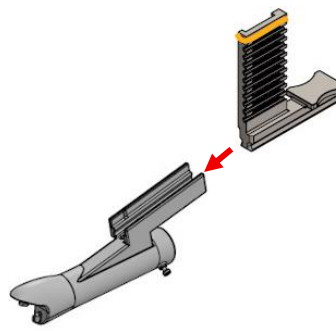

2B-2C

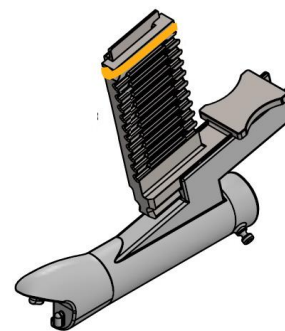

2C

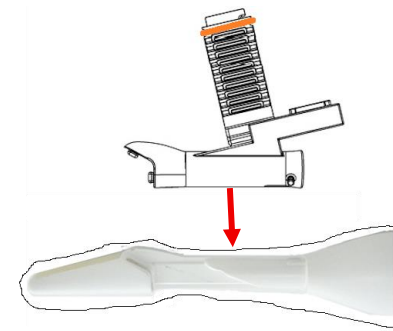

2D

3. Vida útil

La guía de aguja transperineal reutilizable sin esterilizar para EV29L está diseñada de manera que, si se utiliza con el debido cuidado, ofrezca una vida útil de 2 años o 1000 ciclos de reprocesamiento (lo que ocurra antes).

Consulte los siguientes manuales para obtener instrucciones detalladas:

Acción	Manual	Sección del manual
Reprocesamiento (antes del primer uso y antes de cada uso)	Guía de cuidados, limpieza y uso del transductor de disparo lateral de alta resolución EV29L	Capítulo 4: Reprocesamiento Secciones 3.2, 3.3 y 3.5: Reprocesamiento de guías de aguja reutilizables y accesorios* * Las instrucciones de limpieza, esterilización e inspección también son aplicables a la guía de aguja transperineal reutilizable para EV29L, con un tiempo de secado de 45 min tras la esterilización.
Conexión de la guía de aguja montada en el transductor EV29L	Guía de cuidados, limpieza y uso del transductor de disparo lateral de alta resolución EV29L	Capítulo 3: Preparación para la obtención de imágenes Sección 2.1.2: Colocación de la guía de aguja transperineal estéril para EV29L* * Estas instrucciones también son aplicables a la guía de aguja transperineal reutilizable sin esterilizar para EV29L.
Ajustes de software	Manual de seguridad y funcionamiento del microecógrafo de alta resolución ExactVu™	Capítulo 5: Uso del modo 2D Sección 3.3.1: Uso de la guía superpuesta para aguja transperineal* * Estas instrucciones también son aplicables a la guía de aguja transperineal reutilizable sin esterilizar para EV29L.

Si necesita ayuda sobre el uso de su sistema de microecografía ExactVu™ o la guía de aguja transperineal reutilizable sin esterilizar para EV29L, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Exact Imaging. Consulte <https://www.exactimaging.com/contact-us> para encontrar la información de contacto en su región.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2 (Canadá)
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Países Bajos



MedEnvoy Suiza
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suiza

Persona/entidad responsable en el Reino Unido
Emergo Consulting (UK) Limited, c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ (Reino Unido)



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Bélgica

Números de catálogo de Exact Imaging

- EV29L: Transductor EV29L
- EV-TPRG: Guía de aguja transperineal reutilizable sin esterilizar para transductor EV29L
- EV-SYS-220: Sistema de imágenes por microecografía ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Sistema de imágenes por microecografía ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Sistema de imágenes por microecografía ExactVu™ (100 V)