

Ръководство за бърза справка за трансперинеален водач за игла за многократна употреба EV29L

1. Обработка преди първата и всяка следваща употреба


- A. Разделете всички части и изхвърлете лентите от Kraton
- B. Почистване със Cidezyme, 5 минути
 - Използвайте подходяща четка за частите на водача за иглата
 - Изплакнете всички части, включително жлебовете, релсата и каналите, с почистващ препарат
- C. Стерилизация
 - Стерилизация: Автоклав клас B
 - 134°C (273°F) за 3 мин, време за съхнене 45 мин
 - 132°C (270°F) за 4 мин, време за съхнене 45 мин
 - Като алтернатива (ако не е наличен автоклав) Високостепенна дезинфекция: Cidex OPA, 12 минути
 - Изплакнете всички жлебове, релсата и каналите с дезинфектант
 - По време на дезинфекция използвайте мека кърпа, за да избършете повърхността на водача и да отстраните евентуалните мехурчета
- D. Проверка след обработка (без видими пукнатини, промяна на цвета или повреди)

2. Сглобяване

- A. Изберете правилната пластина за размер за процедурата и я поставете в кулата на водача за иглата.
- B. Закрепете пластината за размер към кулата на водача за иглата, като използвате предоставената лента от Kraton.
- C. Поставете кулата/пластината за размер на водача за иглата в релсата на тапата на водача за иглата.
- D. Подгответе трансдюсера EV29L с обвивка. Прикрепете сглобения водач за иглата към канала на водача за иглата EV29L, така че да щракне на мястото си. По избор: Увийте лента от Kraton около трансдюсера и го закрепете към щифта отстрани на тапата на водача за иглата.




2A

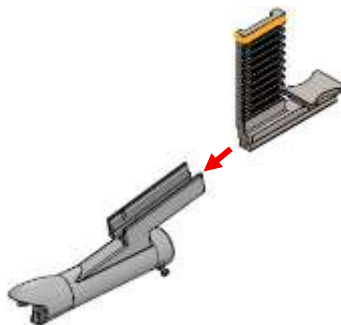

2B-2C



2C

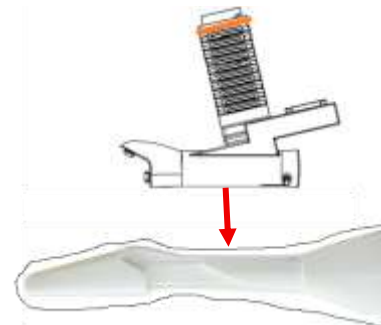

2D

3. Експлоатационен живот

При правилна употреба, трансперинеалният водач за игла EV29L за многократна употреба е проектиран за експлоатационен живот от 2 години или 1000 цикъла на обработка, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

Вижте следните ръководства за подробни инструкции:

Действие	Ръководство	Раздел от ръководството
Обработка (преди първата и всяка следваща употреба)	Ръководство за грижа, почистване и употреба на EV29L	Глава 4: Обработка Раздели 3.2, 3.3 и 3.5: Обработка на водачи за игли за многократна употреба и аксесоари* * Инструкциите за почистване, стерилизация и проверка са приложими и за трансперинеалния водач за игла за многократна употреба EV29L, с време за съхнене 45 минути след стерилизация.
Прикрепване на сглобения водач за иглата към трансдюсера EV29L	Ръководство за грижа, почистване и употреба на EV29L	Глава 3: Подготовка за образна диагностика Раздел 2.1.2: Прикрепване на стерилния трансперинеален водач за игла EV29L* * Тези инструкции са приложими и за трансперинеалния водач за игла за многократна употреба EV29L.
Софтуерни корекции	Ръководство за експлоатация и безопасност на ExactVu	Глава 5: Използване на 2D режим Раздел 3.3.1: Използване на наслагването на водача за иглата на трансперинеалния водач* * Тези инструкции са приложими и за трансперинеалния водач за игла за многократна употреба EV29L.

Ако Ви е необходима **техническа помощ** с Вашата микроултразвукова система ExactVu™ или с трансперинеалния водач за игла за многократна употреба EV29L, се свържете с Техническата поддръжка на Exact Imaging. Вижте <https://www.exactimaging.com/contact-us>, за да намерите информацията за контакт за Вашия регион.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Канада
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Нидерландия



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Швейцария

Отговорно лице за Обединеното кралство
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Обединено кралство



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Белгия

Каталожни номера на Exact Imaging

- EV-29L: Трансдюсер EV29L
- EV-TPRG: Нестерилен трансперинеален водач за игла за многократна употреба EV29L
- EV-SYS-220: ExactVu™ микроултразвукова образна система (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ микроултразвукова образна система (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ микроултразвукова образна система (100V)