


Beknopte naslaggids voor de EV29L herbruikbare transperineale naaldgeleider

1. Herverwerking vóór eerste gebruik en vóór elk gebruik


- A. Demonteer alle onderdelen en gooi de Kraton-bandjes weg
- B. Reiniging: Cidezyme, 5 minuten
 - Gebruik een geschikte borstel voor de onderdelen van de naaldgeleider
 - Spoel alle onderdelen, inclusief groeven, de rail en kanalen, door met reinigingsmiddel
- C. Sterilisatie
 - Sterilisatie: autoclaaf van klasse B
 - 134 °C (273 °F) gedurende 3 min., droogtijd 45 min
 - 132 °C (270 °F) gedurende 4 min., droogtijd 45 min
 - Als alternatief (indien geen autoclaaf beschikbaar is) high-level desinfectie: Cidex OPA, 12 minuten
 - Spoel alle groeven, de rail en kanalen door met desinfectiemiddel
 - Veeg tijdens de desinfectie het oppervlak van de geleider met een zachte doek schoon om eventuele bellen te verwijderen
- D. Inspectie na herverwerking (geen zichtbare scheuren, verkleuringen of beschadigingen)

2. Montage


- A. Selecteer de juiste gauge-plaat voor de ingreep en plaats deze in de naaldgeleidertoren.
- B. Bevestig de gauge-plaat aan de naaldgeleidertoren met behulp van de meegeleverde Kraton-band.
- C. Steek de naaldgeleidertoren/gauge-plaat in de rail van de naaldgeleiderplug.
- D. Maak de EV29L-transducer gereed met een huls. Bevestig de gemonteerde naaldgeleider aan het naaldengeleiderkanaal van de EV29L zodat deze vastklikt. Optioneel: Wikkel een Kraton-band om de transducer en bevestig deze aan de pen op de zijkant van de naaldgeleiderplug.

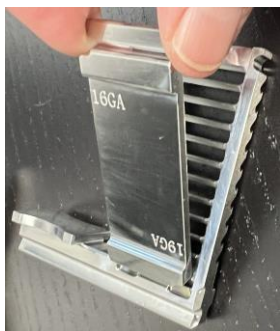


2A

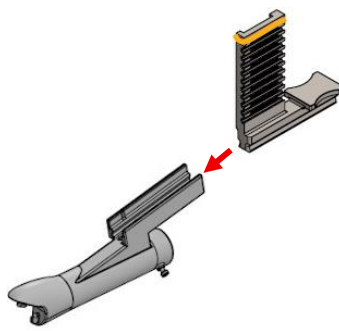

2B-2C

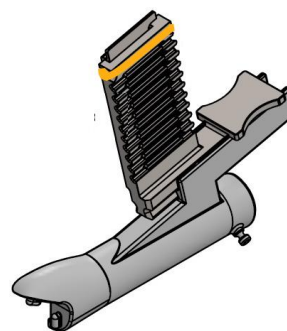

2C

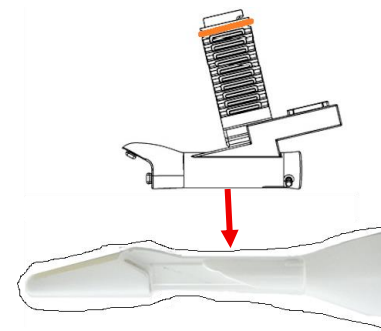

2D

3. Gebruiksduur

Bij correct gebruik is de EV29L herbruikbare transperineale naaldgeleider ontworpen voor een gebruiksduur van 2 jaar of 1000 herwerkingscycli, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

Raadpleeg de volgende handleidingen voor gedetailleerde instructies:

Stap	Handleiding	Onderdeel handleiding
Herverwerking (vóór het eerste en vóór elk gebruik)	Gids voor verzorging, reiniging en gebruik voor de EV29L	Hoofdstuk 4: Herverwerking Paragraaf 3.2, 3.3 en 3.5: Herverwerking van herbruikbare naaldgeleiders en accessoires* * De reinigings-, sterilisatie- en inspectie-instructies zijn ook van toepassing op de EV29L herbruikbare transperineale naaldgeleider, met een droogtijd van 45 minuten na sterilisatie.
Bevestiging van de gemonteerde naaldgeleider aan de EV29L-transducer	Gids voor verzorging, reiniging en gebruik voor de EV29L	Hoofdstuk 3: Voorbereiden voor beeldvorming Paragraaf 2.1.2: De EV29L steriele transperineale naaldgeleider bevestigen* * Deze instructies zijn ook van toepassing op de EV29L herbruikbare transperineale naaldgeleider.
Aanpassing software-instellingen	ExactVu bedienings- en veiligheidshandleiding	Hoofdstuk 5: Gebruik van de 2D-modus Paragraaf 3.3.1: De transperineale naaldgeleideroverlay gebruiken* * Deze instructies zijn ook van toepassing op de EV29L herbruikbare transperineale naaldgeleider.

Als u **technische ondersteuning** nodig hebt voor uw ExactVu™ micro-echografiesysteem of voor de EV29L herbruikbare transperineale naaldgeleider, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Exact Imaging. Ga naar <https://www.exactimaging.com/contact-us> voor contactinformatie in uw regio.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Zwitserland

Vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, Verenigd Koninkrijk



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
België

Exact Imaging-catalogusnummers

- EV-29L: EV29L-transducer
- EV-TPRG: EV29L niet-steriele herbruikbare transperineale naaldgeleider
- EV-SYS-220: ExactVu™-micro-echografiesysteem (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™-micro-echografiesysteem (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™-micro-echografiesysteem (100 V)