


Hızlı Referans Kılavuzu EV29L Tekrar Kullanılabilir Transperineal İğne Kılavuzu

1. İlk ve Her Kullanımdan Önce Tekrar İşleme


- Tüm kısımları ayırın ve Kraton bantlarını atın
- Temizlik Cidezyme, 5 dakika
 - İğne kılavuzu kısımları için uygun bir fırça kullanın
 - Oluklar, ray ve kanallar dahil tüm kısımlardan temizleyici geçirin
- Sterilizasyon
 - Sterilizasyon: Sınıf B otoklav
 - 3 dk 134 °C (273 °F), 45 dk kurutma süresi
 - 4 dk 132 °C (270 °F), 45 dk kurutma süresi
 - Alternatif olarak (otoklav kullanılamıyorsa) Yüksek Düzey Dezenfeksiyon: Cidex OPA, 12 dakika
 - Tüm oluklar, ray ve kanallardan dezenfektan geçirin
 - Dezenfeksiyon sırasında herhangi bir kabarcığı gidermek üzere kılavuz yüzeyini silmek için yumuşak bir bez kullanın
- Tekrar işleme sonrasında inceleme (görünür çatlak, renk değişikliği veya hasar yok)

2. Kurulum


- İşlem için doğru Ölçer Plağı seçin ve İğne Kılavuzu Kulesine yerleştirin.
- Ölçer Plağı İğne Kılavuzu Kulesine sağlanan Kraton bandını kullanarak sabitleyin.
- İğne Kılavuzu Kulesi/Ölçer Plağı İğne Kılavuzu Tıkacındaki raya yerleştirin.
- EV29L transduserini bir kılıfla hazırlayın. Kurulu iğne kılavuzunu EV29L iğne kılavuzu kanalına konumuna tıklayarak oturacak şekilde tutturun. İsteğe bağlı: Transduser etrafına bir Kraton bandı sarın ve İğne Kılavuzu Tıkacı yan tarafındaki çıkıntıya sabitleyin.

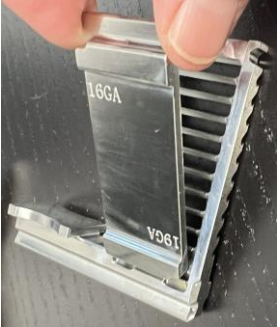


2A

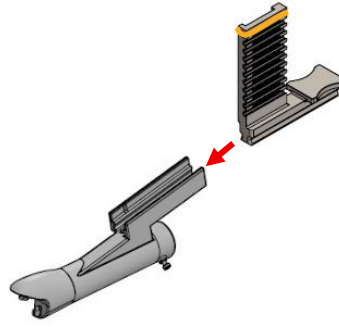

2B-2C

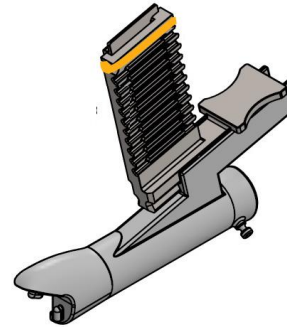

2C

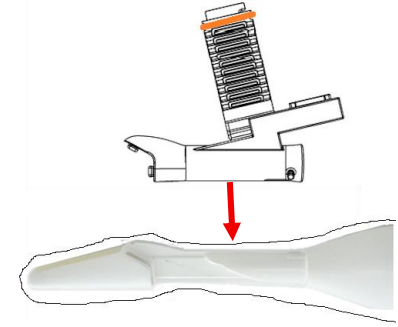

2D

3. Çalışma Ömrü

Uygun bakımla kullanıldığında EV29L Tekrar Kullanılabilir Transperineal İğne Kılavuzu 2 yıl veya 1000 tekrar işleme döngüsü (hangisi önce olursa) şeklinde bir çalışma ömrü için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı Talimat için aşağıdaki Kılavuzlara başvurun:

Eylem	Kılavuz	Kılavuz Kısmı
Tekrar İşleme (ilk ve her kullanımdan önce)	EV29L için Bakım, Temizlik ve Kullanım Kılavuzu	Bölüm 4: Tekrar İşleme Kısım 3.2, 3.3 ve 3.5: Tekrar Kullanılabilir İğne Kılavuzları ve Aksesuarlarını Tekrar İşleme* * Temizlik, Sterilizasyon ve İnceleme talimatı sterilizasyondan sonra 45 dk kurutma süresiyle EV29L Tekrar Kullanılabilir Transperineal İğne Kılavuzu için de geçerlidir.
Kurulu iğne kılavuzunu EV29L Transduserine tutturma	EV29L için Bakım, Temizlik ve Kullanım Kılavuzu	Bölüm 3: Görüntüleme için Hazırlık Kısım 2.1.2: EV29L Steril Transperineal İğne Kılavuzunu Tutturma* * Bu talimat EV29L Tekrar Kullanılabilir Transperineal İğne Kılavuzu için de geçerlidir.
Yazılım Ayarlamaları	ExactVu Çalıştırma ve Güvenlik Kılavuzu	Bölüm 5: 2D Modunu Kullanma Kısım 3.3.1: Transperineal Kılavuz İğne Kılavuzu Üst Katmanını Kullanma* * Bu talimat EV29L Tekrar Kullanılabilir Transperineal İğne Kılavuzu için de geçerlidir.

ExactVu™ mikro-ultrason sisteminiz veya EV29L Tekrar Kullanılabilir Transperineal İğne Kılavuzuyla ilgili teknik yardım gerekirse Exact Imaging **Teknik Destek** ile irtibat kurun. Bölgeniz için irtibat bilgilerini bulmak üzere <https://www.exactimaging.com/contact-us> adresine başvurun.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Hollanda



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
İsviçre

Birleşik Krallık Sorumlu Kişisi
**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Birleşik Krallık



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belçika

Exact Imaging Katalog Numaraları

- EV-29L: EV29L Transduseri
- EV-TPRG: EV29L Steril Olmayan Tekrar Kullanılabilir Transperineal İğne Kılavuzu
- EV-SYS-220: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (100 V)