

Ghid rapid de referință pentru Ghid reutilizabil pentru ac transperineal EV29L

1. Reprocesare înainte de prima utilizare și înainte de fiecare utilizare ulterioară


- A. Separați toate componentele și eliminați benzile din Kraton
- B. Curățare Cidezyme, 5 minute
 - Utilizați o perie adecvată pentru componentele ghidului pentru ac
 - Clătiți toate componentele, inclusiv canelurile, șina și canalele, cu soluția de curățare
- C. Sterilizare
 - Sterilizare: Autoclavă clasa B
 - 134 °C (273 °F) timp de 3 minute, timp de uscare 45 de minute
 - 132 °C (270 °F) timp de 4 minute, timp de uscare 45 de minute
 - Alternativ (dacă nu este disponibilă o autoclavă) dezinfectare de nivel înalt: Cidex OPA, 12 minute
 - Clătiți toate canelurile, șina și canalele cu dezinfectant
 - În timpul dezinfectării, utilizați o lavetă moale pentru a șterge suprafața ghidului și a îndepărta eventualele bule de aer
- D. Inspecție după reprocesare (fără fisuri, modificări de culoare sau deteriorări vizibile)

2. Asamblare

- A. Selectați placa de calibrare corespunzătoare procedurii și introduceți-o în turnul ghidului pentru ac.
- B. Fixați placa de calibrare pe turnul ghidului pentru ac utilizând banda din Kraton furnizată.
- C. Introduceți ansamblul turn ghid pentru ac/placă de calibrare în șina dopului ghidului pentru ac.
- D. Pregătiți traductorul EV29L cu o teacă de protecție. Atașați ghidul pentru ac asamblat la canalul ghidului pentru ac al EV29L, astfel încât acesta să se fixeze în poziție cu un clic. Opțional: Înfășurați o bandă din Kraton în jurul traductorului și fixați-o pe știftul aflat pe partea laterală a dopului ghidului pentru ac.




2A

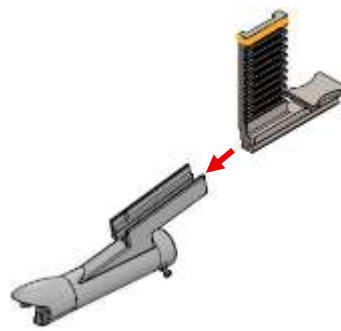

2B-2C



2C

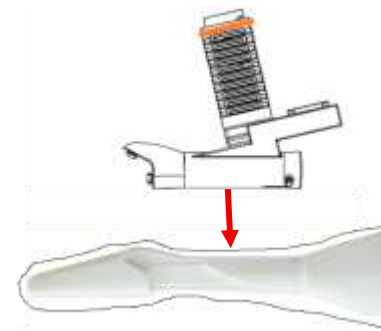

2D

3. Durata de viață

Atunci când este utilizat și întreținut corespunzător, ghidul reutilizabil pentru ac transperineal EV29L este proiectat pentru o durată de viață utilă de 2 ani sau 1000 de cicluri de reprocesare, oricare dintre acestea survine primul.

Consultați următoarele manuale pentru instrucțiuni detaliate:

Acțiune	Manual	Secțiune din manual
Reprocesare (înainte de prima utilizare și înainte de fiecare utilizare ulterioară)	Ghid de întreținere, curățare și utilizare pentru EV29L	Capitolul 4: Reprocesare Secțiunile 3.2, 3.3 și 3.5: Reprocesarea ghidurilor reutilizabile pentru ac și a accesoriilor* * Instrucțiunile privind curățarea, sterilizarea și inspecția sunt aplicabile și ghidului reutilizabil pentru ac transperineal EV29L, cu un timp de uscare de 45 de minute după sterilizare.
Atașarea ghidului pentru ac asamblat la traductorul EV29L	Ghid de întreținere, curățare și utilizare pentru EV29L	Capitolul 3: Pregătirea pentru imagistică Secțiunea 2.1.2: Atașarea ghidului steril pentru ac transperineal EV29L* * Aceste instrucțiuni sunt aplicabile și ghidului reutilizabil pentru ac transperineal EV29L.
Ajustări software	Manual de operare și siguranță ExactVu	Capitolul 5: Utilizarea modului 2D Secțiunea 3.3.1: Utilizarea suprapunerii pentru ghidul pentru ac transperineal* * Aceste instrucțiuni sunt aplicabile și ghidului reutilizabil pentru ac transperineal EV29L.

Dacă aveți nevoie de **asistență tehnică** pentru sistemul dumneavoastră de micro-ultrasunete ExactVu™ sau pentru ghidul reutilizabil pentru ac transperineal EV29L, contactați serviciul de asistență tehnică Exact Imaging. Consultați adresa <https://www.exactimaging.com/contact-us> pentru a găsi informațiile de contact corespunzătoare regiunii dumneavoastră.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Țările de Jos



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Elveția

Persoană responsabilă în Regatul Unit
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, Regatul Unit



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Numere de catalog Exact Imaging

- EV-29L: Traductor EV29L
- EV-TPRG: Ghid reutilizabil nesteril pentru ac transperineal EV29L
- EV-SYS-220: Sistem de imagistică cu micro-ultrasunete ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Sistem de imagistică cu micro-ultrasunete ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Sistem de imagistică cu micro-ultrasunete ExactVu™ (100 V)