


Hurtigveiledning for EV29L gjenbrukbar transperineal nåleguide

1. Reprosessering før første gangs bruk og hver bruk


- A. Ta alle delene fra hverandre, og kast Kraton-båndene
- B. Rengjøring – Cidezyme, 5 minutter
 - Bruk en egnet børste for nåleguidens deler
 - Skyll gjennom alle deler, inkludert fordypninger, skinnen og kanaler, med rengjøringsmiddelet
- C. Sterilisering
 - Sterilisering: Autoklav klasse B
 - 134 °C (273 °F) i 3 min, tørketid 45 min
 - 132 °C (270 °F) i 4 min, tørketid 45 min
 - Alternativt (hvis autoklav ikke er tilgjengelig) høynivådesinfeksjon: Cidex OPA, 12 minutter
 - Skyll gjennom alle fordypninger, skinnen og kanaler med desinfeksjonsmiddelet
 - Under desinfisering brukes en myk klut til å tørke av overflaten på guiden for å fjerne bobler
- D. Inspeksjon etter reprosessering (ingen synlige spekker, misfarging eller skade)

2. Montering


- A. Velg riktig måleplate for prosedyren og plasser den i nåleguidetårnet.
- B. Fest måleplaten til nåleguidetårnet ved hjelp av det medfølgende Kraton-båndet.
- C. Sett nåleguidetårnet/måleplaten inn i skinnen i nåleguidepluggen.
- D. Klargjør EV29L-transduseren med en hylse. Fest den monterte nåleguiden i nåleguidekanalen på EV29L slik at den klikker på plass. Valgfritt: Vikle et Kraton-bånd rundt transduseren og fest det til tappen på siden av nåleguidepluggen.

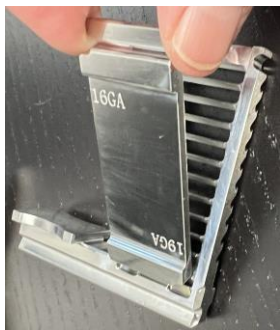


2A

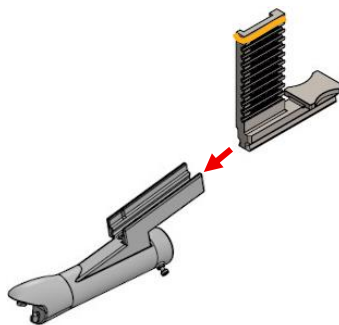

2B-2C

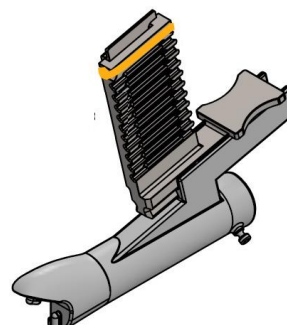

2C

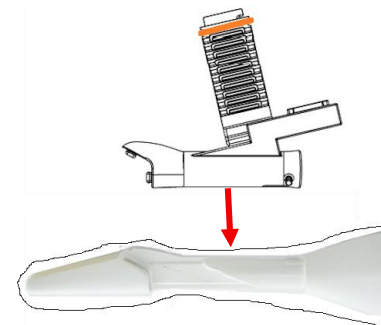

2D

3. Funksjonell levetid

Forutsatt forsvarlig bruk er EV29L gjenbrukbar transperineal nåleguide konstruert for en funksjonell levetid på inntil 2 år eller 1000 repossesseringssykluser, avhengig av hva som inntreffer først.

Se de følgende håndbøkene for detaljerte instruksjoner:

Tiltak	Håndbok	Del av håndboken
Repossessering (før første gangs bruk og hver bruk)	Veiledning for stell, rengjøring og bruk av EV29L	Kapittel 4: Repossessering Avsnitt 3.2, 3.3 og 3.5: Repossessering av gjenbrukbare nåleguider og tilbehør* *Instruksjonene for rengjøring, sterilisering og inspeksjon gjelder også for EV29L gjenbrukbar transperineal nåleguide, med tørketid 45 min etter sterilisering.
Feste den monterte nåleguiden på EV29L-transduseren	Veiledning for stell, rengjøring og bruk av EV29L	Kapittel 3: Klargjøring for avbildning Avsnitt 2.1.2: Feste EV29L steril transperineal nåleguide* *Disse instruksjonene gjelder også for EV29L gjenbrukbar transperineal nåleguide.
Programvarejusteringer	Bruker- og sikkerhetshåndbok for ExactVu	Kapittel 5: Bruke 2D-modus Avsnitt 3.3.1: Bruke den transperineale nåleguidens overlegg* *Disse instruksjonene gjelder også for EV29L gjenbrukbar transperineal nåleguide.

Hvis du trenger **teknisk assistanse** med ExactVu™ mikro-ultralydsystemet eller med EV29L gjenbrukbar transperineal nåleguide, kontakter du teknisk støtte hos Exact Imaging. Se <https://www.exactimaging.com/contact-us> for å finne kontaktopplysningene for din region.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Sveits

Ansvarlig representant i Storbritannia
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, Storbritannia



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Exact Imaging-katalognumre

- EV-29L: EV29L-transduser
- EV-TPRG: EV29L ikke-steril gjenbrukbar transperineal nåleguide
- EV-SYS-220: ExactVu™ mikro-ultralydavbildningssystem (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ mikro-ultralydavbildningssystem (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ mikro-ultralydavbildningssystem (100 V)