


Pikaopas Uudelleenkäytettävä transperineaalinen EV29L-neulanohjain

1. Käsittely ennen ensimmäistä ja jokaista seuraavaa käyttökertaa


- A. Irrota kaikki osat toisistaan ja hävitä Kraton-nauhat.
- B. Puhdistus Cidezyme, 5 minuuttia.
 - Käytä neulanohjaimen osille sopivaa harjaa.
 - Huuhtelee kaikki osat, mukaan lukien urat, kisko ja kanavat, puhdistusaineella.
- C. Sterilointi
 - Sterilointi: Luokan B autoklaavi.
 - 134 °C (273 °F) 3 minuutin ajan, kuivausaika 45 minuuttia.
 - 132 °C (270 °F) 4 minuutin ajan, kuivausaika 45 minuuttia.
 - Vaihtoehtona (jos autoklaavia ei ole saatavilla) korkean tason desinfiointi: Cidex OPA, 12 minuuttia.
 - Huuhtelee kaikki urat, kisko ja kanavat desinfiointiaineella.
 - Pyyhi ohjaimen pintaa desinfiointin yhteydessä pehmeällä liinalla kuplien poistamiseksi.
- D. Tarkastus uudelleen käsittelyn jälkeen (ei näkyviä halkeamia, värimuutoksia tai vaurioita).

2. Kokoonpano


- A. Valitse toimenpiteeseen sopiva mittalevy ja aseta se neulanohjaimen torniin.
- B. Kiinnitä mittalevy neulanohjaimen torniin toimitetun Kraton-nauhan avulla.
- C. Aseta neulanohjaimen torni / mittalevy neulanohjainpistokkeen kiskoon.
- D. Aseta suojus EV29L-anturin päälle. Kiinnitä koottu neulanohjain EV29L:n neulanohjainkanavaan siten, että se napsahtaa paikalleen. Valinnainen: Kiedo Kraton-nauha anturin ympärille ja kiinnitä se neulanohjainpistokkeen sivussa olevaan tappiin.

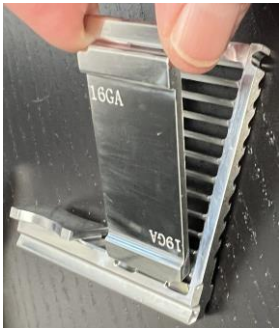


2A

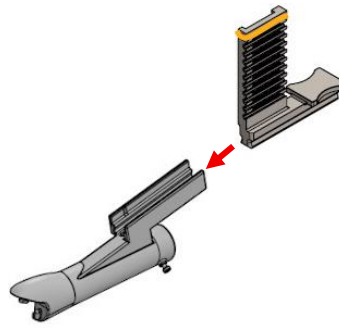

2B-2C

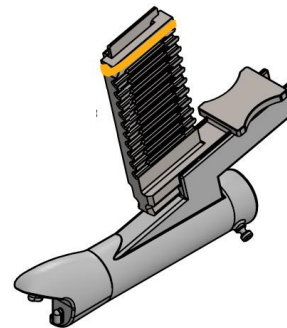

2C

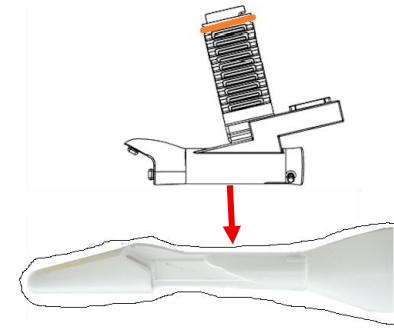

2D

3. Käyttöikä

Kun uudelleenkäytettävää transperineaalista EV29L-neulanohjainta käytetään asianmukaisesti, sen käyttöikä on 2 vuotta tai 1 000 uudelleenkäsittelykertaa riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin.

Katso tarkat ohjeet seuraavista käyttöoppaista:

Toiminto	Opas	Oppaan osio
Uudelleenkäsittely (ennen ensimmäistä ja jokaista seuraavaa käyttökertaa)	EV29L:n hoito-, puhdistus- ja käyttöopas	Luku 4: Uudelleenkäsittely Osiot 3.2, 3.3 ja 3.5: Uudelleenkäytettävien neulanohjainten ja lisätarvikkeiden uudelleenkäsittely* * Puhdistus-, sterilointi- ja tarkastusohjeet ovat sovellettavissa myös uudelleenkäytettävään transperineaaliseen EV29L-neulanohjaimeen; kuivumisaika on 45 minuuttia steriloinnin jälkeen.
Kootun neulanohjaimen kiinnittäminen EV29L-anturiin	EV29L:n hoito-, puhdistus- ja käyttöopas	Luku 3: Kuvantamisen valmistelu Osio 2.1.2: Steriilin transperineaalisen EV29L-neulanohjaimen kiinnittäminen* * Nämä ohjeet ovat sovellettavissa myös uudelleenkäytettävään transperineaaliseen EV29L-neulanohjaimeen.
Ohjelmistosäädöt	ExactVu-käyttö- ja -turvallisuusopas	Luku 5: 2D-tilan käyttö Osio 3.3.1: Transperineaalisen neulanohjaimen peitegrafiikan käyttö* * Nämä ohjeet ovat sovellettavissa myös uudelleenkäytettävään transperineaaliseen EV29L-neulanohjaimeen.

Jos tarvitset **teknistä apua** ExactVu™-mikroultraäänijärjestelmän tai uudelleenkäytettävän transperineaalisen EV29L-neulanohjaimen käytössä, ota yhteys Exact Imaging -yhtiön tekniseen tukeen. Oman alueesi yhteystiedot löydät osoitteesta <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1 905 415 0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Alankomaat



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Sveitsi

Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Yhdistynyt kuningaskunta



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Exact Imaging -tuoteluettelonumerot

- EV-29L: EV29L-anturi
- EV-TPRG: Ei-steriili uudelleenkäytettävä transperineaalinen EV29L-neulanohjain
- EV-SYS-220: ExactVu™-mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™-mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™-mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (100 V)