

Οδηγός γρήγορης αναφοράς για τον Επαναχρησιμοποιήσιμο οδηγό διαπερινεϊκής βελόνας EV29L

1. Επανεπεξεργασία πριν την πρώτη και πριν από κάθε χρήση


- A. Διαχωρίστε όλα τα μέρη και απορρίψτε τις ταινίες Kraton
- B. Καθαρισμός Cidezyme, 5 λεπτά
 - Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη βούρτσα για τα μέρη του οδηγού βελόνας
 - Κάντε έκπλυση όλων των μερών με καθαριστικό, συμπεριλαμβανομένων των εγκοπών, της ράγας και των καναλιών
- C. Αποστείρωση
 - Αποστείρωση: Σε αυτόκαυστο, Κατηγορίας B
 - 134 °C (273 °F) για 3 λεπτά, χρόνος στεγνώματος 45 λεπτά
 - 132 °C (270 °F) για 4 λεπτά, χρόνος στεγνώματος 45 λεπτά
 - Εναλλακτικά (εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτόκαυστο) απολύμανση υψηλού επιπέδου: Cidex OPA, 12 λεπτά
 - Κάντε έκπλυση των εγκοπών, της ράγας και των καναλιών με καθαριστικό
 - Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε την επιφάνεια του οδηγού και να απομακρύνετε τυχόν φυσαλίδες
- D. Έλεγχος μετά την επανεπεξεργασία (χωρίς ορατές ρωγμές, αποχρωματισμό ή ζημιές)

2. Συναρμολόγηση

- A. Επιλέξτε τη σωστή πλάκα μέτρησης για τη διαδικασία και τοποθετήστε την στον πύργο του οδηγού βελόνας.
- B. Στερεώστε την πλάκα μέτρησης στον πύργο του οδηγού βελόνας, χρησιμοποιώντας την ταινία Kraton που παρέχεται.
- C. Εισαγάγετε τον πύργο του οδηγού βελόνας/την πλάκα μέτρησης στη ράγα στο βύσμα του οδηγού βελόνας.
- D. Προετοιμάστε τον μορφοτροπέα EV29L με ένα θηκάρι. Προσαρτήστε τον συναρμολογημένο οδηγό βελόνας στο κανάλι του οδηγού βελόνας EV29L, έτσι ώστε να εφαρμόσει στη θέση του με έναν ήχο «κλικ». Προαιρετικά: Τυλίξτε μια ταινία Kraton γύρω από τον μορφοτροπέα και στερεώστε την στον πείρο στο πλαίσιο του βύσματος του οδηγού βελόνας.




2Α

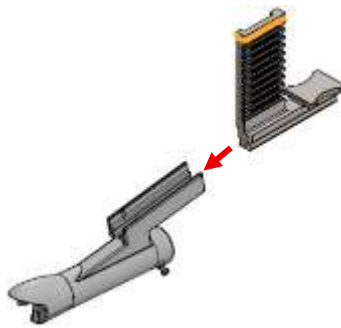

2Β-2Γ



2Γ

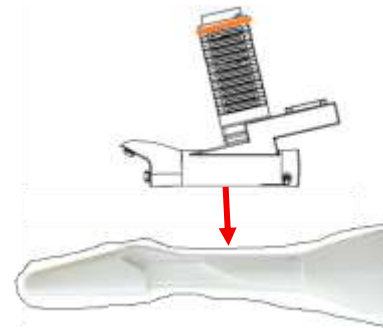

2Δ

3. Διάρκεια ζωής εργασίας

Όταν χρησιμοποιείται με την κατάλληλη φροντίδα, ο επαναχρησιμοποιήσιμος οδηγός διαπερινεϊκής βελόνας EV29L είναι σχεδιασμένος για να αποδίδει διάρκεια ζωής εργασίας 2 ετών ή 1000 κύκλων επανεπεξεργασίας, όποιο χρονικό διάστημα συμπληρωθεί πρώτο.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα εγχειρίδια για λεπτομερείς οδηγίες:

Ενέργεια	Εγχειρίδιο	Ενότητα εγχειριδίου
Επανεπεξεργασία (πριν την πρώτη και πριν από κάθε χρήση)	Οδηγός φροντίδας, καθαρισμού και χρήσης για το EV29L	Κεφάλαιο 4: Επανεπεξεργασία Ενότητα 3.2, 3.3 και 3.5: Επανεπεξεργασία επαναχρησιμοποιήσιμων οδηγών διαπερινεϊκής βελόνας και εξαρτημάτων* * Οι οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και ελέγχου ισχύουν επίσης και για τον Επαναχρησιμοποιήσιμο οδηγό διαπερινεϊκής βελόνας EV29L, με χρόνο στεγνώματος 45 λεπτά μετά την αποστείρωση.
Προσάρτηση του συναρμολογημένου οδηγού βελόνας στον μορφοτροπέα EV29L	Οδηγός φροντίδας, καθαρισμού και χρήσης για το EV29L	Κεφάλαιο 3: Προετοιμασία για απεικόνιση Ενότητα 2.1.2: Προσάρτηση του επαναχρησιμοποιήσιμου οδηγού διαπερινεϊκής βελόνας EV29L* * Αυτές οι οδηγίες ισχύουν επίσης και για τον Επαναχρησιμοποιήσιμο οδηγό διαπερινεϊκής βελόνας EV29L.
Ρυθμίσεις λογισμικού	Εγχειρίδιο λειτουργίας και ασφάλειας ExactVu	Κεφάλαιο 5: Χρήση λειτουργίας 2D Ενότητα 3.3.1: Χρήση της επικάλυψης του επαναχρησιμοποιήσιμου οδηγού διαπερινεϊκής βελόνας* * Αυτές οι οδηγίες ισχύουν επίσης και για τον Επαναχρησιμοποιήσιμο οδηγό διαπερινεϊκής βελόνας EV29L.

Εάν χρειαστείτε **τεχνική βοήθεια** με το σύστημα μικροϋπερήχων ExactVu™ ή με τον Επαναχρησιμοποιήσιμο οδηγό διαπερινεϊκής βελόνας EV29L, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Exact Imaging. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.exactimaging.com/contact-us> για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Καναδάς
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Ελβετία

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Κάτω Χώρες

Πρόσωπο υπεύθυνο για το Ηνωμ. Βασίλειο
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Ηνωμένο Βασίλειο



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Βέλγιο

Αριθμοί καταλόγου Exact Imaging

- EV-29L: Μορφοτροπέας EV29L
- EV-TPRG: Μη αποστειρωμένος επαναχρησιμοποιήσιμος οδηγός διαπερινεϊκής βελόνας EV29L
- EV-SYS-220: Σύστημα απεικόνισης μικροϋπερήχων ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Σύστημα απεικόνισης μικροϋπερήχων ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Σύστημα απεικόνισης μικροϋπερήχων ExactVu™ (100 V)