

Rövid kezelési útmutató a következő termékhez: EV29L újrafelhasználható transzperineális tűvezető

1. Újrafeldolgozás az első és minden használat előtt


- A. Válasszon szét minden alkatrészt, és ártalmatlanítsa a Kraton pántokat
- B. Tisztítás Cidezyme, 5 perc
 - Használjon megfelelő keféket a tűvezető alkatrészeihez
 - Öblítsen át tisztítószerrel minden alkatrészt, beleértve a barázdákat, a sít és a csatornákat
- C. Sterilizálás
 - Sterilizálás: B osztályú autokláv
 - 134 °C (273 °F) 3 percig, szárítási idő: 45 perc
 - 132 °C (270 °F) 4 percig, szárítási idő: 45 perc
 - Alternatív lehetőségként (ha nem áll rendelkezésre autokláv) magas szintű fertőtlenítés: Cidex OPA, 12 perc
 - Öblítsen át fertőtlenítőszerrel minden barázdát, sít és csatornát
 - Fertőtlenítés során használjon puha törlőkendőt a vezető felszínének letörléséhez, a buborékok eltávolítása érdekében
- D. Újrafeldolgozás utáni vizsgálat (nincsenek látható repedések, elszíneződés vagy sérülés)

2. Összeszerelés

- A. Válassza ki a megfelelő mérőlemezt az eljáráshoz, és helyezze a tűvezető toronyba.
- B. A biztosított Kraton pánt segítségével rögzítse a mérőlemezt a tűvezető toronyba.
- C. Helyezze be a tűvezető tornyot/mérőlemezt a tűvezető csatlakozójában lévő sínbe.
- D. Készítse elő az EV29L transzducert egy hüvellyel. Csatlakoztassa az összeszerelt tűvezetőt az EV29L tűvezető csatornához, hogy a helyére kattanjon. Opcionális: Tekerje a Kraton pántot a transzducer köré, és rögzítse a tűvezető csatlakozója oldalán lévő dugóhoz.




2A

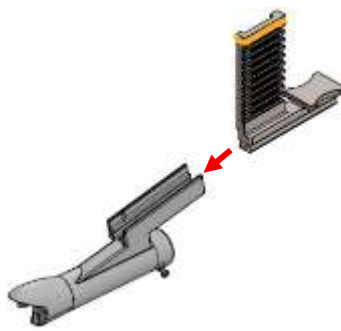

2B-2C



2C

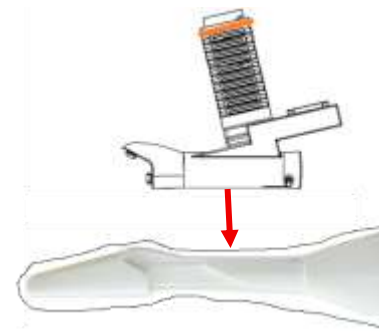

2D

3. Élettartam

Megfelelő használat esetén az EV29L újrafelhasználható transzperineális tűvezető tervezés szerinti élettartama 2 év vagy 1000 újrafeldolgozási ciklus, amelyik előbb bekövetkezik.

Részletes utasításokért tekintse meg az alábbi kézikönyveket:

Művelet	Kézikönyv	A kézikönyv szakasza
Újrafeldolgozás (az első és minden használat előtt)	Ápolási, tisztítási és használati útmutató az EV29L eszközhöz	4. fejezet: Újrafeldolgozás 3.2., 3.3. és 3.5. szakasz: Újrafelhasználható tűvezetők és tartozékok újrafeldolgozása* * A tisztítási, sterilizálási és vizsgálati utasítások az EV29L újrafelhasználható transzperineális tűvezetőre is vonatkoznak. A sterilizálás utáni szárítási idő 45 perc.
Az összeszerelt tűvezető csatlakoztatása az EV29L transzducerhez	Ápolási, tisztítási és használati útmutató az EV29L eszközhöz	3. fejezet: Képkalkotási előkészületek 2.1.2. szakasz: Az EV29L steril transzperineális tűvezető csatlakoztatása* * Ezek az utasítások az EV29L újrafelhasználható transzperineális tűvezetőre is vonatkoznak.
A szoftver beállításai	ExactVu kezelési és biztonsági kézikönyv	5. fejezet: A 2D mód használata 3.3.1. szakasz: A transzperineális tűvezető átfedés használata* * Ezek az utasítások az EV29L újrafelhasználható transzperineális tűvezetőre is vonatkoznak.

Ha **műszaki segítségre** van szüksége az ExactVu™ mikro-ultrahang rendszerrel vagy az EV29L újrafelhasználható transzperineális tűvezetővel kapcsolatban, forduljon az Exact Imaging műszaki ügyfélszolgálatához. Az Ön régiójának megfelelő elérhetőségeket lásd a <https://www.exactimaging.com/contact-us> honlapon.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Hollandia



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Svájc

Felelős személy az Egyesült Királyságban
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Egyesült Királyság



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgium

Exact Imaging katalógusszámok

- EV-29L: EV29L transzducer
- EV-TPRG: EV29L nem steril, újrafelhasználható transzperineális tűvezető
- EV-SYS-220: ExactVu™ mikro-ultrahangos képalkotó rendszer (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ mikro-ultrahangos képalkotó rendszer (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ mikro-ultrahangos képalkotó rendszer (100 V)