


EV29L 再使用可能経会陰式ニードルガイド クイックレファレンスガイド

1. 初回および毎回の使用前の再処理


- A. すべての部品を分解し、Kraton バンドは廃棄します
- B. Cidezyme で 5 分間洗浄します
 - ニードルガイド部品には適切なブラシを使用してください
 - 溝、レール、チャネルを含むすべての部品を洗浄液で洗い流します
- C. 滅菌
 - 滅菌：クラス B オートクレーブ
 - 134°C (273°F) にて 3 分、乾燥時間 45 分
 - 132°C (270°F) にて 4 分、乾燥時間 45 分
 - (オートクレーブを使用できない場合) 代替の高水準消毒：Cidex OPA で 12 分間
 - すべての溝、レール、チャネルを消毒液で洗い流します
 - 消毒の際には、柔らかい布でガイド表面を拭き、気泡を除去します
- D. 再処理後の点検 (目視により、ひび割れ、変色、または損傷がないこと)

2. 組立て


- A. 手技に対して適切なゲージプレートを選択し、ニードルガイドタワーにセットします。
- B. 付属の Kraton バンドを使用して、ゲージプレートをニードルガイドタワーに固定します。
- C. ニードルガイドタワー／ゲージプレートを、ニードルガイドプラグのレールに挿入します。
- D. EV29L トランスデューサにシースを取り付けて準備します。組み立てたニードルガイドを EV29L のニードルガイドチャネルに取り付け、カチッとはめ込みます。任意：Kraton バンドをトランスデューサの周りに巻き付け、ニードルガイドプラグ側面のペグに固定します。

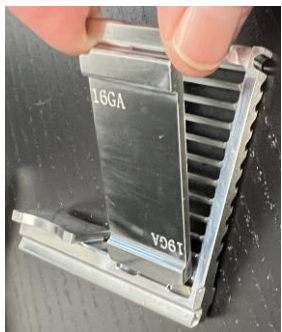


2A

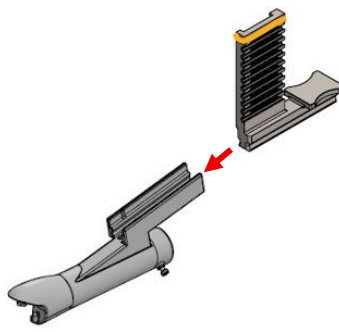

2B-2C

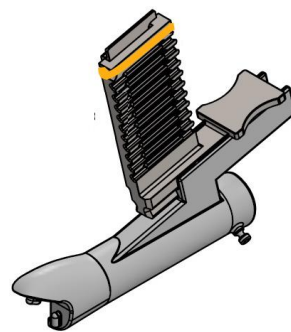

2C

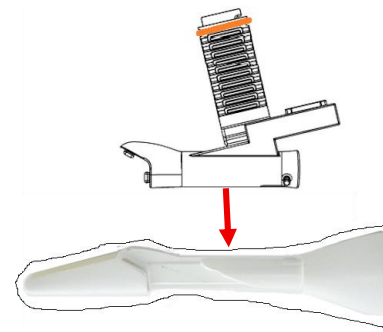

2D

3. 使用寿命

適切な取扱いのもとで使用した場合、EV29L 再使用可能経会陰式ニードルガイドは、2 年間または 1,000 回の再処理サイクルのいずれか先に達した時点が使用寿命となるよう設計されています。

詳しい手順は、以下の各マニュアルを参照してください：

アクション	マニュアル	マニュアル内の項
再処理 (初回および毎回の使用前)	EV29L の手入れ、洗浄、 および使用に関するガイド	第 4 章：再処理 第 3.2、3.3、および 3.5 項：再使用可能ニードルガイドおよび付属品の再処理* * 洗浄、滅菌、および点検に関する手順は、EV29L 再使用可能経会陰式ニードルガイドにも適用されます。その際の滅菌後の乾燥時間は 45 分です。
組み立てたニードルガイドの EV29L トランスデューサへの 取付け	EV29L の手入れ、洗浄、お よび使用に関するガイド	第 3 章：イメージングの準備 第 2.1.2 項：滅菌済み EV29L 経会陰式ニードルガイドの取付け* * これらの手順は、EV29L 再使用可能経会陰式ニードルガイドにも適用されます。
ソフトウェアの調整	ExactVu の操作・安全マ ニュアル	5 章：2D モードの使用 3.3.1 項：経会陰式ニードルガイドのオーバーレイの使用* * これらの手順は、EV29L 再使用可能経会陰式ニードルガイドにも適用されます。

ExactVu™マイクロ超音波システムまたは EV29L 経会陰式ニードルガイドに関する**技術的サポート**が必要な場合は、Exact Imaging テクニカルサポートまでご連絡ください。該当地域の連絡先情報は、こちらを参照してください：<https://www.exactimaging.com/contact-us>。



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

英国における責任者
**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ United Kingdom



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgium

Exact Imaging カタログ番号

- EV-29L : EV29L トランスデューサ
- EV-TPRG : EV29L 再使用可能経会陰式ニードルガイド (非滅菌)
- EV-SYS-220 : ExactVu™マイクロ超音波イメージングシステム (220V)
- EV-SYS-120 : ExactVu™マイクロ超音波イメージングシステム (120V)
- EV-SYS-100 : ExactVu™マイクロ超音波イメージングシステム (100V)