

Ръководство за бърза справка за тапа/трансректален водач за игла за многократна употреба EV29L

1. Обработка преди първата и всяка следваща употреба

- а. Разглобете преди обработка
- б. Почистване със Cidezyme, 5 минути
 - Използвайте подходяща четка за канали/канюли
 - Промийте всички канали/канюли с почистващ препарат
- с. Стерилизация
 - Стерилизация: Автоклав клас В
 - 134°C (273°F) за 3 минути
 - 132°C (270°F) за 4 минути
 - Като алтернатива (ако не е наличен автоклав) Високостепенна дезинфекция: Cidex OPA, 12 минути
 - Промийте всички канали/канюли с дезинфектант
- д. Инспекция след обработка

2. Сглобяване/Разглобяване*




3. Прикрепване към трансдюсера EV29L

4. Софтуерни корекции

- а. Режим за анестезия: Изберете опция **35°** за ъгъл на водача за иглата
- б. Режим за биопсия: Не се изисква промяна

*Тази стъпка не е необходима за използване като тапа (за процедури само с образна диагностика).


**Поставете пластмасовия корпус под обвивката, за да го използвате като тапа (за процедури само с образна диагностика).

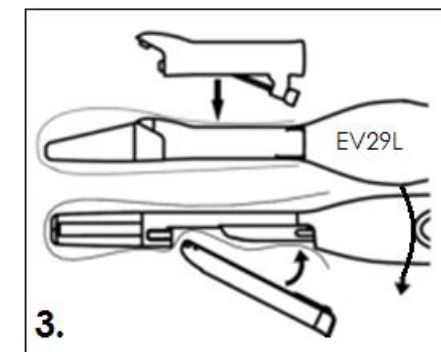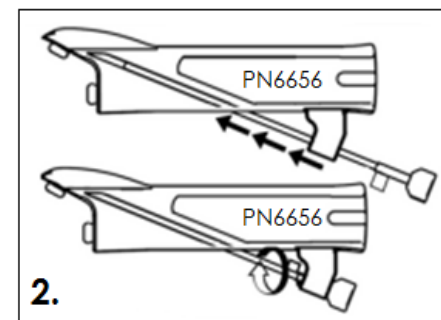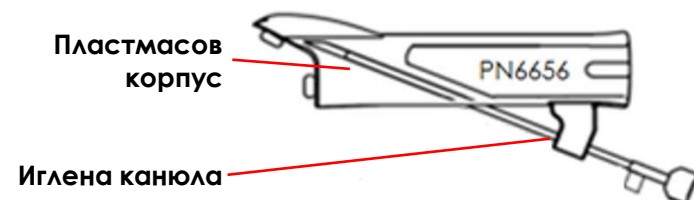

Вижте следните ръководства за подробни инструкции:

Стъпка	Ръководство	Раздел от ръководството
1. Обработка (преди първата и всяка следваща употреба)	Ръководство за грижа, почистване и употреба на EV29L	Глава 4: Обработка Раздел 3: Обработка на трансректалния водач за игла за многократна употреба EV29L
2. Сглобяване/Разглобяване		Глава 2: Обща информация Раздел 2.2.2.3: Подготовка на водача за иглата за употреба
3. Прикрепване към EV29L Трансдюсер		Глава 3: Подготовка за образна диагностика Раздел 2.1.1: Прикрепване на трансректалния водач за иглата
4. Софтуерни корекции	Ръководство за експлоатация и безопасност на ExactVu	Глава 5: Използване на 2D режим Раздел 2.3.1: Използване на наслабяването на водача за иглата с трансдюсера EV29L

Ако Ви е необходима **техническа помощ** с Вашата микроултразвукова система ExactVu™ или с трансректалния водач за игла за многократна употреба EV29L, се свържете с отдела за техническа поддръжка, като използвате информацията за контакт за Вашия регион на адрес <https://www.exactimaging.com/contact-us>.

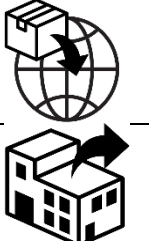 Exact Imaging Inc. 7676 Woodbine Avenue, Unit 15 Markham, ON L3R 2N2, Канада +1.905.415.0030 info@exactimaging.com				
	Emergo Europe Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Нидерландия		MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Швейцария	Отговорно лице за Обединеното кралство Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International Compass House, Vision Park Histon Cambridge CB24 9BZ Обединено кралство
	Exact Imaging BVBA Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508 9000 Gent Белгия	Каталожни номера на Exact Imaging • EV-29L: Трансдюсер EV29L • EV-BIOGR: Трансректален водач за игла за многократна употреба EV29L, 18 GA • EV-BIOG-R16: Трансректален водач за игла за многократна употреба EV29L, 16 GA • EV-SYS-220: ExactVu™ микроултразвукова образна система (220 V) • EV-SYS-120: ExactVu™ микроултразвукова образна система (120 V) • EV-SYS-100: ExactVu™ микроултразвукова образна система (100 V)		