

Lista de produtos químicos aprovados para uso em transdutores ExactVu™

Tipo de produto	Nome químico	Fabricante	Transdutor transretal		Transdutor superficial	Tempo de contato validado
			EV29L	EV9C	EV5C	
Limpador	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	⊘	1 minuto
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	⊘	1 minuto
Desinfetante e de alto nível	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	12 minutos
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	⊘	45 minutos
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	⊘	✓	8 minutos
Pano ou spray	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	⊘	⊘	✓	30 segundos
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	30 segundos (esporicida)

* O FDA considera a "Metricide Activated Dialdehyde Solution" fabricada pela Metrex Research, Inc. (glutaraldeído a 2,6%, 14 dias para reutilização) idêntica à Cidex®.

Tabela 1: Lista de produtos químicos aprovados

OBSERVAÇÃO



Use apenas produtos de limpeza e desinfecção aprovados em sua região.

Siga as instruções do fabricante ao usar desinfetantes e outros produtos de limpeza.

Consulte no *Guia de cuidados, limpeza e uso do transdutor* as instruções sobre como reprocessar o transdutor entre utilizações e a localização do nível de imersão.

As imagens a seguir mostram o nível de imersão dos transdutores.



Figura 1: Nível de imersão do transdutor EV29L

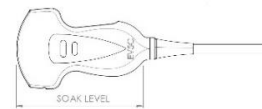


Figura 3: Nível de imersão do transdutor EV5C

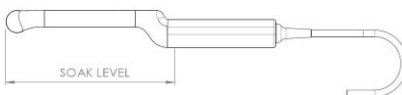


Figura 2: Nível de imersão do transdutor EV9C

AVISO
EN-C25



Nunca mergulhe o transdutor abaixo do nível de imersão

Lista de produtos químicos aprovados para uso em transdutores ExactVu™

Prefácio



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canadá
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Amhem
Países Baixos

Marcas comerciais

Marcas da Exact Imaging

- ExactVu™
- EV29L™
- EV9C™
- EV5C™

CIDEZYME®, CIDEX® e ENZOL® são marcas registradas da Johnson & Johnson.
Revital-Ox™ é marca registrada da Steris Corporation. Resert® é marca registrada da Steris Corporation.
Transeptic® é marca registrada da Parker Laboratories Inc.

Versionamento

Sistema: Microultrassonógrafo de alta resolução ExactVu™

Lista de produtos químicos aprovados para uso em transdutores ExactVu™, PN 7222, Versão 1.7,
instruções originais

