

Guia de Referência Rápida para reprocessamento do guia de agulha reutilizável e suporte EV29L

1. Antes do primeiro uso e de cada uso subsequente:

a. Desmonte antes de reprocessar

b. Limpeza com Cidezyme por 5 minutos

- Use uma escova apropriada para canais e cânulas
- Lave todos os canais e cânulas com a solução de limpeza

c. Esterilização

• Esterilização: Autoclave classe B

- 134°C (273°F) por 3 min
- 132°C (270°F) por 4 min
- Alternativa (se não houver autoclave) Desinfecção de alto nível: Cidex OPA, 12 minutos
- Lave todos os canais e cânulas com desinfetante




d. Inspeção após reprocessar

2. Montagem e desmontagem*

3. Instalação no transdutor EV29L**

4. Ajustes de software

- Modo Anesthesia: Selecione a opção **35°** para o guia da agulha
- Modo Biopsy: Não requer mudança

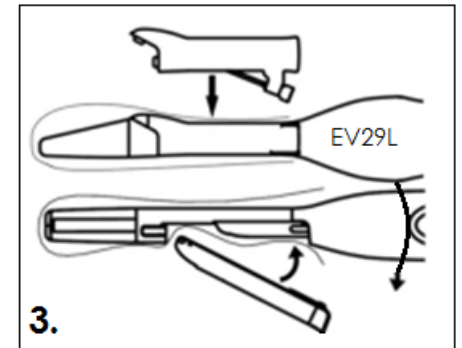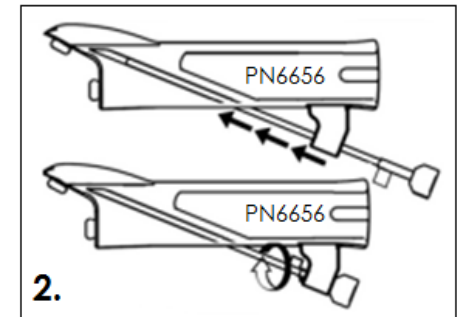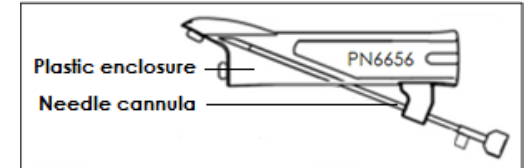

*Pule esta etapa se for usar o transdutor com plugue (procedimento apenas de imagem).

**Coloque o invólucro plástico embaixo da bainha para uso como plugue (procedimento apenas de imagem).

Para obter instruções mais detalhadas, consulte os seguintes manuais:

Etapa	Manual	Seção do manual
1. Reprocessamento (antes do primeiro uso e de cada uso)	Guia de Cuidados, Limpeza e Uso do EV29L (PN 7218)	Capítulo 4: Reprocessamento Seção 3: Reprocessamento do guia de agulha transretal reutilizável EV29L
2. Montagem e desmontagem		Capítulo 2: Informações gerais Seção 2.2.2.3: Preparação do guia de agulha transretal para uso
3. Instalação no transdutor EV29L		Capítulo 3: Preparação para aquisição de imagem Seção 2.1.1: Instalação do guia de agulha
4. Ajustes de software	Manual de uso e segurança do ExactVu (PN 7217)	Capítulo 5: Usando o modo 2D Seção 2.3.1: Usando a marcação do trajeto de agulha com o transdutor EV29L

Se precisar de **assistência técnica** para o microultrassonógrafo ExactVu™ ou para o guia de agulha reutilizável EV29L, lépjen kapcsolatba a műszaki támogatóssal a régiójára vonatkozó kapcsolattfelvételi információk segítségével a <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canadá
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Países Baixos