

Списък с одобрени имикали за трансдюсери ExactVu™

Вид на химикала	Наименование на химикала	Производител	Трансректален трансдюсер			Повърхностен трансдюсер	Утвърдено време за контакт
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Почистващ продукт	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 минута
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 минута
Висококачествен дезинфектант	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 минути
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 минути
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 минути
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 минути
Спрей за избърсване/напръскване	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 секунди
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 секунди (спороциден ефект)

* Администрацията по храните и лекарствата (FDA) е приела "Metricide Activated Dialdehyde Solution", произведен от Metrex Research, Inc. (2,6% глутаралдехид, с повторна употреба след 14 дни) като идентичен на Cidex®.

Таблица 1: Списък с одобрени химикали


Изображенията по-долу показват нивото на потапяне на трансдюсерите.



Фигура 1: Ниво на потапяне на EV29L



Фигура 3: Ниво на потапяне на EV5C

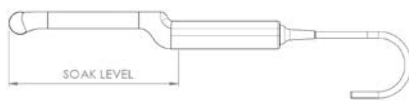

Фигура 2: Ниво на потапяне на EV9C

ВНИМАНИЕ

EN-C25



Не потапяйте трансдюсера над нивото на потапяне.

Използвайте продукти за почистване и дезинфекция, които са одобрени за употреба във Вашия регион.

ЗАБЕЛЕЖКА



Спазвайте инструкциите за употреба на дезинфектантите и почистващите препарати, дадени от производителя.

Вижте Ръководството за поддръжка, почистване и употреба на Вашия трансдюсер относно инструкции за повторната му обработка между отделните пациенти и местоположението на нивото на потапяне.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Нидерландия



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Швейцария



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Белгия



Отговорно лице
за Обединено
кралство

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Обединено кралство

Търговски марки

Търговски марки на Exact Imaging

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® and ENZOL® са регистрирани търговски марки на Johnson & Johnson. Revital-Ox™ е търговска марка на Steris Corporation. Resert® е регистрирана търговска марка на Steris Corporation.

Transeptic® е регистрирана търговска марка на Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ е търговска марка на CIVCO Medical Solutions.

Каталожни номера на Exact Imaging

- EV-29L: Трансдюсер EV29L
- EV-9C: Трансдюсер EV9C
- EV-5C: Трансдюсер EV5C
- EV-SYS-220: Система за микроултразвуково изобразяване ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Система за микроултразвуково изобразяване ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Система за микроултразвуково изобразяване ExactVu™ (100V)

Информация за версията

Система: Система за микроултразвук с висока разделителна способност ExactVu™

Списък на одобрените химикали за трансдюсери ExactVu™, редакция 2.1 (BG), оригинални инструкции