

Кратко справочно ръководство за Нестерилен адаптер за многократна употреба PrecisionPoint EV29L

1. Обработка преди първата и всяка следваща употреба

a. Почистване с Sidezyme, 5 минути

- Използвайте подходяща четка за канали/канюли
- Промийте всички канали/канюли с почистващ препарат
- След почистване, изплакнете в продължение на 5 минути.

b. Стерилизация


• Стерилизация: Автоклав клас B

- 134°C (273°F) за 3 минути
- 132°C (270°F) за 4 минути

c. Проверка след обработка (без видими пукнатини, промяна на цвета или повреда)

2. Прикрепване към трансдюсер EV29L

Поставете пластмасовия адаптер върху обвивката. Прикрепете всяко рамо на водача PrecisionPoint към страните на адаптера. Водачът PrecisionPoint е предназначен за еднократна употреба и следва да се използва в съответствие с указанията на производителя.

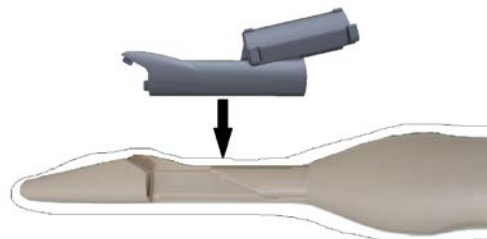

2a



2b



2c

3. Експлоатационен живот

Ако се полага подходящата грижа, адаптерът за многократна употреба PrecisionPoint EV29L е проектиран за експлоатационен живот от 3 месеца или 75 цикъла на обработка в зависимост от това кое настъпи първо.

Вижте следните Ръководства за подробни инструкции:

Стъпка	Ръководство	Раздел от ръководството
1. Обработка (преди първата и всяка следваща употреба)	Ръководство за грижа, почистване и употреба за EV29L	Глава 4: Обработка Раздел 3.2, 3.3 и 3.5: Обработка на водачи и аксесоари за игли за многократна употреба* * Инструкциите за почистване, стерилизация и проверка са приложими и за адаптера за многократна употреба PrecisionPoint EV29L .
2. Прикрепване към трансдюсер EV29L	Ръководство за грижа, почистване и употреба за EV29L	Глава 3: Подготовка за образно изследване Раздел 2.1.1: Закрепване на водача на иглата* * Тези инструкции са приложими и за адаптера за многократна употреба PrecisionPoint EV29L.

Ако се нуждаете от **техническа помощ за** вашата микроултразвукова система ExactVu™ или за адаптера за многократна употреба PrecisionPoint EV29L, се свържете с техническата поддръжка на Exact Imaging. Вижте <https://www.exactimaging.com/contact-us>, за да намерите информацията за контакт за вашия регион.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Канада
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Нидерландия



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Швейцария

Отговорно лице за Обединеното кралство
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Обединеното кралство



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Белгия

Каталожни номера на Exact Imaging

- EV-29L: Трансдюсер EV29L
- EV-BIOGR-PP: Адаптер за многократна употреба PrecisionPoint EV29L
- EV-SYS-220: Микро-ултразвукова система ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Микро-ултразвукова система ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Микро-ултразвукова система ExactVu™ (100V)