

# Seznam schválených chemických látek pro sondu ExactVu™

Typ chemické látky	Název chemické látky	Výrobce	Transrektální sonda			Povrchová sonda	Potvrzená kontaktní doba
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Čistící prostředek	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuta
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuta
Vysokoúrovňový dezinfekční prostředek	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minut
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minut
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minut
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minut
Hadřík / sprej	Aérosol Transeptic®	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 sekund
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekund (sporicidní)

\* Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přijal „Metricidem aktivovaný roztok dialdehydu“ vyráběný společností Metrex Research, Inc. (2,6 % glutaraldehyd, lze opětovně použít po 14 dní) jako totožnou alternativu přípravku Cidex®.

**Tabulka 1: Seznam schválených chemických látek**

**POZNÁMKA**



Používejte čisticí a dezinfekční prostředky schválené k použití ve vaší zemi.

Vždy se řiďte pokyny výrobce při používání dezinfekčních a čisticích prostředků.

Odkazujeme vás na *Návod na péči, čištění a použití* vaší sondy pro pokyny ke zpracování mezi použitím a umístěním její *hladiny namočení*.

Na níže uvedených obrázcích je znázorněna *hladina namočení* sond.


## Seznam schválených chemických látek pro sondy ExactVu™



**Obrázek 1: Hladina namočení EV29L**



**Obrázek 3: Hladina namočení EV5C**

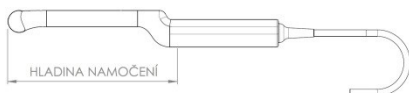

**Obrázek 2: Hladina namočení EV9C**

### UPOZORNĚNÍ

EN-C25



---

Neponořujte sondu pod její hladinu namočení.

---

## Seznam schválených chemických látek pro sondy ExactVu™

### Předmluva



**Exact Imaging Inc.**  
7676 Woodbine Avenue, Unit 15  
Markham, ON L3R 2N2, Canada  
+1 905 415 0030  
info@exactimaging.com



**Emergo Europe**  
Westervoortsewijk 60  
6827 AT Arnhem  
Nizozemsko



**EDAP TMS**  
4, rue du Dauphiné  
69120 Vaulx-en-Velin  
Francie



### Ochranné známky

Ochranné známky společnosti Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® a ENZOL® jsou registrované ochranná známky Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ je ochranná známka Steris Corporation. Resert® je registrovaná ochranná známka Steris Corporation.

Transeptic® je registrovaná ochranná známka Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ je ochranná známka CIVCO Medical Solutions.

### Katalogové č. společnosti Exact Imaging

- EV-29L: Sonda EV29L
- EV-9C: Sonda EV9C
- EV-5C: Sonda EV5C
- EV-SYS-220: ExactVu™ Mikro ultrazvukový zobrazovací systém (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ Mikro ultrazvukový zobrazovací systém (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ Mikro ultrazvukový zobrazovací systém (100V)

### Informace o verzi

Systém: Ultrazvukový mikrosystém s vysokým rozlišením ExactVu™

Seznam schválených chemikálií pro sondy ExactVu™, Revize 1.9 (CS), překlad původních pokynů

