



Seznam schválených chemických látek pro sondu ExactVu™

Typ chemické látky	Název chemické látky	Výrobce	Transrektální sonda			Povrchová sonda	Potvrzená kontaktní doba
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Čistící prostředek	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuta
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuta
Vysokoúrovňový dezinfekční prostředek	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minut
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minut
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minut
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minut
Hadřík / sprej	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 sekund
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekund (sporicidní)


* Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přijal „Metricidem aktivovaný roztok dialdehydu“ vyráběný společností Metrex Research, Inc. (2,6 % glutaraldehyd, lze opětovně použít po 14 dni) jako totožnou alternativu přípravku Cidex®.

Tabulka 1: Seznam schválených chemických látek


Na níže uvedených obrázcích je znázorněna *hladina namočení* sond.



Obrázek 1: Hladina namočení EV29L

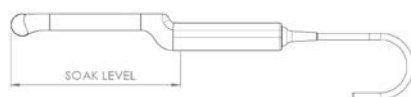

Obrázek 2: Hladina namočení EV9C

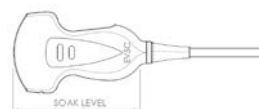

Obrázek 3: Hladina namočení EV5C

UPOZORNĚNÍ

EN-C25



Neponořujte sondu pod její hladinu namočení.

POZNÁMKA



Používejte čisticí a dezinfekční prostředky schválené k použití ve vaší zemi.

Vždy se řiďte pokyny výrobce při používání dezinfekčních a čisticích prostředků.

Odkazujeme vás na *Návod na péči, čištění a použití* vaší sondy pro pokyny ke zpracovávání mezi použitím a umístění její hladiny namočení.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nizozemsko



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Švýcarsko



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgie

UK Odpovědná
osoba

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Spojené království

Ochranné známky

Ochranné známky společnosti Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® a ENZOL® jsou registrované ochranné známky Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ je ochranná známka Steris Corporation. Resert® je registrovaná ochranná známka Steris Corporation.

Transeptic® je registrovaná ochranná známka Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ je ochranná známka CIVCO Medical Solutions.

Katalogové č. společnosti Exact Imaging

- EV-29L: Sonda EV29L
- EV-9C: Sonda EV9C
- EV-5C: Sonda EV5C
- EV-SYS-220: ExactVu™ Mikro ultrazvukový zobrazovací systém (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ Mikro ultrazvukový zobrazovací systém (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ Mikro ultrazvukový zobrazovací systém (100V)

Informace o verzi

Systém: Ultrazvukový mikrosystém s vysokým rozlišením ExactVu™

Seznam schválených chemikálií pro sondy ExactVu™, Revize 2.1 (CZ), překlad původních pokynů