

Stručná referenční příručka pro nesterilní opakovaně použitelný adaptér EV29L PrecisionPoint

1. Opakované zpracování před prvním a každým použitím

a. Čištění Cidezyme, 5 minut

- Použijte vhodný kartáček na kanálky/kanyly.
- Propláchněte všechny kanálky/kanyly čisticím prostředkem.
- Po čištění oplachujte 5 minut.

b. Sterilizace


• Sterilizace: Autokláv třídy B

- 134 °C (273 °F) po dobu 3 minut
- 132 °C (270 °F) po dobu 4 minut

c. Kontrola po opakovaném zpracování (nesmí být viditelné praskliny, změna barvy ani poškození)

2. Připojení ke snímači EV29L

Nainstalujte plastový adaptér na horní část pláště. Připevněte každé rameno vodícího systému PrecisionPoint k bočním stranám adaptéru. Vodicí systém PrecisionPoint je určen pro jednorázové použití a měl by být používán v souladu s návodem k použití výrobce (IFU).

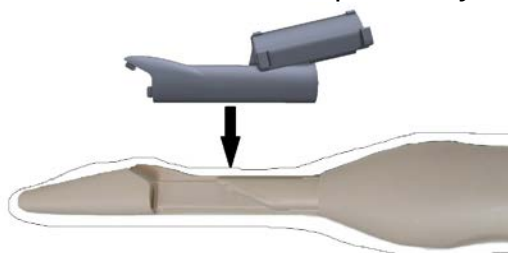

2a



2b



2c

3. Doba používání

Při správném zacházení je nesterilní opakovaně použitelný adaptér EV29L PrecisionPoint určen k používání po dobu 3 měsíců nebo 75 cyklů opakovaného zpracování – podle toho, co nastane dříve.

Podrobné pokyny naleznete v následujících příručkách:

Krok	Příručka	Oddíl příručky
1. Opakované zpracování (před prvním a každým použitím)	Příručka pro péči, čištění a použití EV29L	Kapitola 4: Opakované zpracování Oddíly 3.2, 3.3 a 3.5: Opakované zpracování opakovaně použitelných vodiček jehel a příslušenství* * Pokyny pro čištění, sterilizaci a kontrolu se vztahují také na opakovaně použitelný adaptér EV29L PrecisionPoint.
2. Připojení ke snímači EV29L	Příručka pro péči, čištění a použití EV29L	Kapitola 3: Příprava na zobrazování Oddíl 2.1.1: Připojení vodícího systému jehly* * Tyto pokyny se vztahují také na opakovaně použitelný adaptér EV29L PrecisionPoint.

Pokud potřebujete **technickou podporu** pro mikroultrazvukový systém ExactVu™ nebo opakovaně použitelný adaptér EV29L PrecisionPoint, obraťte se na technickou podporu společnosti Exact Imaging. Kontaktní informace pro váš region naleznete na adrese <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Nizozemsko



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Švýcarsko

Odpovědná osoba ve Spojeném království
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Spojené království



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgie

Katalogová čísla Exact Imaging

- EV-29L Snímač EV29L
- EV-BIOGR-PP: EV29L Opakovaně použitelný adaptér PrecisionPoint
- EV-SYS-220: Mikroultrazvukový zobrazovací systém ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Mikroultrazvukový zobrazovací systém ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Mikroultrazvukový zobrazovací systém ExactVu™ (100V)