



Lijst van goedgekeurde chemische producten voor ExactVu™-transducers

Type chemisch product	Naam chemisch product	Fabrikant	Transrectale transducer			Oppervlakte-transducer	Gevalideerde contactduur
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Reinigings-middel	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuut
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuut
High level-desinfecteer-middel	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minuten
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minuten
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minuten
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minuten
doekje/spray	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 seconden
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 seconden (sporicide)

* De FDA heeft de "Metricide Activated Dialdehyde Solution" zoals vervaardigd door Metrex Research, Inc. (2,6% glutaraaldehyde, hergebruik 14 dagen) identiek aan Cidex® bevonden.

Tabel 1: Lijst van goedgekeurde chemische producten


Op onderstaande afbeeldingen staat het *dompelpeil* voor de transducers weergegeven.



Afbeelding 1: Dompelpeil EV29L



Afbeelding 3: Dompelpeil EV5C

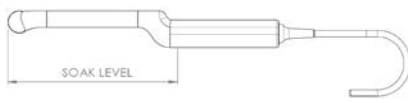

Afbeelding 2: Dompelpeil EV9C

LET OP
EN-C25



De transducer mag niet voorbij het dompelpeil worden ondergedompeld.

Gebruik reinigings- en desinfectieproducten die in uw regio voor gebruik zijn goedgekeurd.

OPMERKING



Volg de instructies van de fabrikant voor het gebruik van desinfecteermiddelen en reinigingsmiddelen.

Raadpleeg de *Gids voor verzorging, reiniging en gebruik van uw transducer* voor instructies over het herverwerken na en voor elk gebruik en de locatie van het *dompelpeil* van de transducer.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Zwitserland



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
België



Verantwoordelijke
Persoon VK

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Verenigd Koninkrijk

Handelsmerken

Handelsmerken Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® en ENZOL® zijn geregistreerde handelsmerken van Johnson & Johnson.
Revital-Ox™ is een handelsmerk van Steris Corporation. Resert® is een geregistreerd handelsmerk van Steris Corporation.

Transeptic® is een geregistreerd handelsmerk van Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ is een handelsmerk van CIVCO Medical Solutions.

Exact Imaging catalogusnummers

- EV-29L: EV29L-transducer
- EV-9C: EV9C-transducer
- EV-5C: EV5C-transducer
- EV-SYS-220: ExactVu™ micro-echografiesysteem (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ micro-echografiesysteem (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ micro-echografiesysteem (100 V)

Versie-informatie

Systeem: ExactVu™-micro-echografiesysteem met hoge resolutie

Lijst van goedgekeurde chemische producten voor ExactVu™-transducers, revisie 2.1 (NL), *vertaling van de oorspronkelijke instructies*