

Beknorte naslaggids voor de EV29L niet-steriele herbruikbare PrecisionPoint-adapter

1. Herverwerking voor het eerste en voor elk gebruik

a. Reiniging met Cidezyme, 5 minuten

- Gebruik een geschikte borstel voor kanalen/canules
- Spoel alle kanalen/canules door met de reiniger
- Spoel na de reiniging gedurende 5 minuten.

b. Sterilisatie


• Sterilisatie: autoclaaf Klasse B

- 3 minuten op 134 °C (273 °F)
- 4 minuten op 132 °C (270 °F)

c. Inspectie na herverwerking (geen zichtbare barsten, verkleuring of schade)

2. Bevestiging op de EV29L-transducer


Plaats de kunststof adapter boven op de huls. Bevestig elke arm van de PrecisionPoint-geleider aan de zijkanten van de adapter. De PrecisionPoint-geleider is voor eenmalig gebruik en dient overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te worden gebruikt.

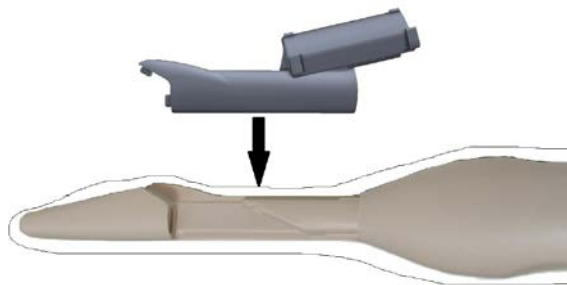

2a



2b

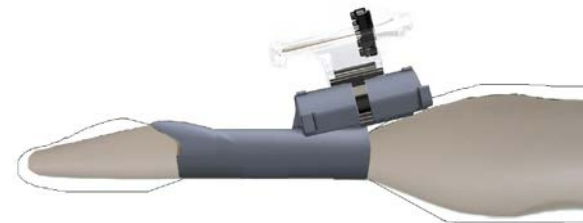

2c

3. Levensduur

Bij zorgvuldig gebruik heeft de EV29L niet-steriele herbruikbare PrecisionPoint-adapter een levensduur van 3 maanden of 75 herverwerkingscycli.

Raadpleeg de volgende handleidingen voor uitgebreide instructies:

Stap	Handleiding	Paragraaf in handleiding
1. Herverwerking (voor het eerste en voor ^[1] _{SEP} elk gebruik)	Gids voor verzorging, reiniging en gebruik van de EV29L	Hoofdstuk 4: Herverwerking Paragraaf 3.2, 3.3 en 3.5: Herverwerking van herbruikbare naaldgeleiders en accessoires* * De instructies voor reiniging, sterilisatie en inspectie zijn ook van toepassing op de EV29L herbruikbare PrecisionPoint-adapter.
2. Bevestiging op de EV29L-transducer	Gids voor verzorging, reiniging en gebruik van de EV29L	Hoofdstuk 3: Voorbereiden voor beeldvorming ^[1] _{SEP} Paragraaf 2.1.1: De naaldgeleider bevestigen* * Deze instructies zijn ook van toepassing op de EV29L herbruikbare PrecisionPoint-adapter.

Neem voor **technische assistentie** voor uw ExactVu™ micro-echografiesysteem of de EV29L herbruikbare PrecisionPoint-adapter contact op met de technische ondersteuning van Exact Imaging. Zie <https://www.exactimaging.com/contact-us> voor de contactinformatie voor uw regio.



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030

info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Zwitserland

Verantwoordelijke persoon in het VK
Emergo Consulting (UK) Limited p/a Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Verenigd Koninkrijk



Exact Imaging BVBA

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
België

Exact Imaging catalogusnummers

- EV-29L: EV29L-transducer
- EV-BIOGR-PP: EV29L herbruikbare PrecisionPoint-adapter
- EV-SYS-220: ExactVu™ micro-echografiesysteem (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ micro-echografiesysteem (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ micro-echografiesysteem (100V)