

Hyväksytyjen kemikaalien luettelo ExactVu™-antureille

Kemikaalin tyyppi	Kemikaalin nimi	Valmistaja	Transrektaalinen anturi			Pinta- anturi	Validoitu kosketusaika
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Puhdistusaine	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuutti
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuutti
Korkean tason desinfiointiaine	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minuuttia
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	45 minuuttia
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	×	✓	8 minuuttia
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	×	✓	8 minuuttia
Pyyhintä/ suihkutus	Transeptic®- suihke	Parker Laboratories	×	×	×	✓	30 sekuntia
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekuntia (itiöitä tappava)

* FDA on hyväksynyt Metrex Research, Inc:n valmistaman "MetriCide-aktivoidun dialdehydiliuoksen" (2,6 % glutaarialdehydiä, 14 päivän uudelleenkäyttö) identtiseksi Cidexin® kanssa.

Taulukko 1: Hyväksytyjen kemikaalien luettelo

HUOMAUTUS




Käytä puhdistus- ja desinfiointiaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi alueellasi.

Noudata desinfiointi- ja puhdistusaineiden käytössä valmistajien ohjeita.

Katso anturisi *Ylläpito-, puhdistus- ja käyttöoppaasta* ohjeet laitteen uudelleen käsittelyyn kunkin käyttökerran jälkeen sekä sen *upotusrajan* paikka.

Alla olevissa kuvissa näytetään anturien *upotusraja*.


Hyväksytyjen kemikaalien luettelo ExactVu™-antureille

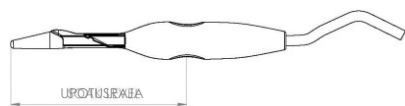

Kuva 1: EV29L-upotusraja



Kuva 3: EV5C-upotusraja

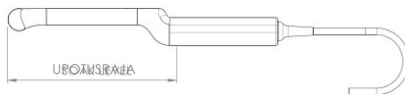

Kuva 2: EV9C-upotustaso

VAROITUS

EN-C25



Älä upota anturia sen upotusrajaa syvemmälle.

Hyväksytyjen kemikaalien luettelo ExactVu™-antureille

Johdanto



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1 905 415 0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Alankomaat



EDAP TMS

4, rue du Dauphiné
69120 Vaulx-en-Velin
Ranska



Tavaramerkit

Exact Imaging -tavaramerkit:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® ja ENZOL® ovat Johnson & Johnsonin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Revital-Ox™ on Steris Corporationin tavaramerkki. Resert® on Steris Corporationin tavaramerkki.
Transeptic® on Parker Laboratories Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
UltrOx™ on CIVCO Medical Solutionsin tavaramerkki.

Exact Imaging -luetteloviitteet

- EV-29L: EV29L-anturi
- EV-9C: EV9C-anturi
- EV-5C: EV5C-anturi
- EV-SYS-220: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (100V)

Versiotiedot

Järjestelmä: ExactVu™ – Korkearesoluutioinen mikroultraäänijärjestelmä

Hyväksytyjen kemikaalien luettelo ExactVu™-antureille, versio 1.9 (FI), *käännös alkuperäisistä ohjeista*

