



# Hyväksytyjen kemikaalien luettelo


## ExactVu™-antureille

| Kemikaalin tyyppi              | Kemikaalin nimi     | Valmistaja                      | Transrektaalinen anturi |                  |                  | Pinta-anturi | Validoitu kosketusaika        |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                     |                                 | EV29L                   | EV9C<br>SN 6750- | EV9C<br>SN 6087- | EV5C         |                               |
| Puhdistusaine                  | CIDEZYME®           | Advanced Sterilization Products | ✓                       | ✓                | ✓                | ×            | 1 minuutti                    |
|                                | ENZOL®              | Advanced Sterilization Products | ✓                       | ✓                | ✓                | ×            | 1 minuutti                    |
| Korkean tason desinfiointiaine | CIDEX® OPA          | Advanced Sterilization Products | ✓                       | ✓                | ✓                | ✓            | 12 minuuttia                  |
|                                | CIDEX®              | Advanced Sterilization Products | ✓                       | ✓                | ✓                | ×            | 45 minuuttia                  |
|                                | Revital-Ox™ Resert® | Steris Corporation              | ✓                       | ✓                | ×                | ✓            | 8 minuuttia                   |
|                                | UltrOx™             | CIVCO Medical Solutions         | ✓                       | ✓                | ×                | ✓            | 8 minuuttia                   |
| Pyyhintä/suihkutus             | Transeptic® Spray   | Parker Laboratories             | ×                       | ×                | ×                | ✓            | 30 sekuntia                   |
|                                | Tristel Trio        | Tristel Solutions               | ✓                       | ✓                | ✓                | ✓            | 30 sekuntia (itiöitä tappava) |


\* FDA on hyväksynyt Metrex Research, Inc:n valmistaman "MetriCide-aktivoidun dialdehydiliuoksen" (2,6 % glutaarialdehydiä, 14 päivän uudelleenkäyttö) identtiseksi Cidexin® kanssa.

**Taulukko 1: Hyväksytyjen kemikaalien luettelo**


Alla olevissa kuvissa näytetään anturien *upotusraja*.

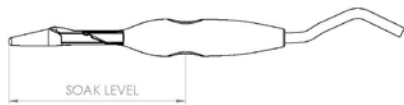

**Kuva 1: EV29L-upotusraja**

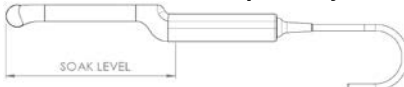

**Kuva 2: EV9C-upotustaso**

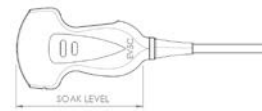

**Kuva 3: EV5C-upotusraja**

**VAROITUS**  
EN-C25



Älä upota anturia sen upotusraja syvemmälle.

**HUOMAUTUS**



Käytä puhdistus- ja desinfiointiaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi alueellasi.

Noudata desinfiointi- ja puhdistusaineiden käytössä valmistajien ohjeita.

Katso anturisi *Ylläpito-, puhdistus- ja käyttöoppaasta* ohjeet laitteen uudelleen käsittelyyn kunkin käyttökerran jälkeen sekä sen *upotusrajan* paikka.



**Exact Imaging Inc.**  
7676 Woodbine Avenue, Unit 15  
Markham, ON L3R 2N2, Canada  
+1.905.415.0030  
info@exactimaging.com



**Emergo Europe**  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Alankomaat



**MedEnvoy Switzerland**  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Sveitsi



**Exact Imaging BVBA**  
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508  
9000 Gent  
Belgia

Yhdistyneen  
kuningaskunnan  
vastuuhenkilö

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o  
Cr360 – UL International**  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ  
Yhdistynyt kuningaskunta

**Tavaramerkit**

Exact Imaging -tavaramerkit:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® ja ENZOL® ovat Johnson & Johnsonin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Revital-Ox™ on Steris Corporationin tavaramerkki. Resert® on Steris Corporationin tavaramerkki.

Transeptic® on Parker Laboratories Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

UltrOx™ on CIVCO Medical Solutionsin tavaramerkki.

**Exact Imaging -luetteloviitteet**

- EV-29L: EV29L-anturi
- EV-9C: EV9C-anturi
- EV-5C: EV5C-anturi
- EV-SYS-220: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (100V)

**Versiotiedot**

Järjestelmä: ExactVu™ – Korkearesoluutioinen mikroultraäänijärjestelmä

Hyväksytyjen kemikaalien luettelo ExactVu™-antureille, versio 2.1 (FI), *käännös alkuperäisistä ohjeista*