

# Hyväksytyjen kemikaalien luettelo


## ExactVu™-antureille

Kemikaalin tyyppi	Kemikaalin nimi	Valmistaja	Transrektaalinen anturi			Pinta-anturi	Validoitu kosketusaika
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Puhdistusaine	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuutti
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuutti
Korkean tason desinfiointiaine	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minuuttia
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	45 minuuttia
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	×	✓	8 minuuttia
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	×	✓	8 minuuttia
Pyyhintä/ suihkutus	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	×	×	×	✓	30 sekuntia
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekuntia (itiöitä tappava)


\* FDA on hyväksynyt Metrex Research, Inc:n valmistaman "MetriCide-aktivoitun dialdehydiliuoksen" (2,6 % glutaarialdehydiä, 14 päivän uudelleenkäyttö) identtiseksi Cidexin® kanssa.

### Taulukko 1: Hyväksytyjen kemikaalien luettelo

Alla olevissa kuvissa näytetään anturien *upotusraja*.

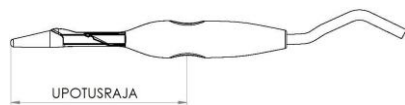

**Kuva 1: EV29L-upotusraja**

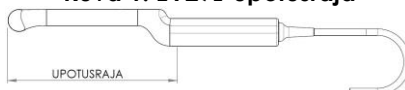

**Kuva 2: EV9C-upotustaso**



**Kuva 3: EV5C-upotusraja**

**VAROITUS**  
EN-C25



Älä upota anturia sen upotusrajaa syvemmälle.

**HUOMAUTUS**



Käytä puhdistus- ja desinfiointiaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi alueellasi.

Noudata desinfiointi- ja puhdistusaineiden käytössä valmistajien ohjeita.

Katso anturisi Ylläpito-, puhdistus- ja käyttöoppaasta ohjeet laitteen uudelleen käsittelyyn kunkin käyttökerran jälkeen sekä sen upotusrajan paikka.



**Exact Imaging Inc.**

7676 Woodbine Avenue, Unit 15  
Markham, ON L3R 2N2, Canada  
+1.905.415.0030  
info@exactimaging.com



**Emergo Europe**

Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



**EDAP TMS**

4, rue du Dauphiné  
69120 Vaulx-en-Velin  
France



**Tavaramerkit**

Exact Imaging -tavaramerkit:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® ja ENZOL® ovat Johnson & Johnsonin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Revital-Ox™ on Steris Corporationin tavaramerkki. Resert® on Steris Corporationin tavaramerkki.

Transeptic® on Parker Laboratories Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

UltrOx™ on CIVCO Medical Solutionsin tavaramerkki.

**Exact Imaging -luetteloviitteet**

- EV-29L: EV29L-anturi
- EV-9C: EV9C-anturi
- EV-5C: EV5C-anturi
- EV-SYS-220: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (100V)

**Versiotiedot**

Järjestelmä: ExactVu™ – Korkearesoluutioinen mikroultraäänijärjestelmä

Hyväksytyjen kemikaalien luettelo ExactVu™-antureille, versio 2.0 (FI), käänös alkuperäisistä ohjeista

