

EV29L uudelleenkäytettävän, steriilin PrecisionPoint -sovittimen pikaopas

1. Uudelleenkäsittely ennen ensimmäistä ja jokaista käyttökertaa

a. Puhdistus, Cidezyme, 5 minuuttia

- Käytä kanaville/kanyyleille sopivaa harjaa
- Huuhtelee kaikki kanavat/kanyylit puhdistusaineella
- Huuhtelee 5 minuuttia puhdistuksen jälkeen.

b. Sterilointi


• Sterilointi: Luokan B autoklaavi

- 134 °C (273 °F) 3:n minuutin ajan
- 132 °C (270 °F) 4:n minuutin ajan

c. Tarkastus uudelleenkäsittelyn jälkeen (ei näkyviä halkeamia, värimuutoksia tai vaurioita)

2. Kiinnittäminen EV29L-anturiin


Asenna muovinen sovitin suojuksen päälle. Kiinnitä PrecisionPoint-ohjaimen kumpikin varsi sovittimen sivuille. PrecisionPoint-ohjain on kertakäyttöinen, ja sitä tulee käyttää valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

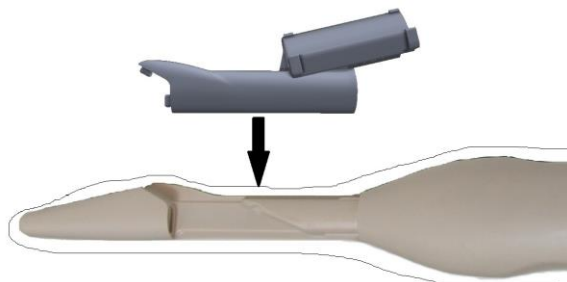

2a



2b

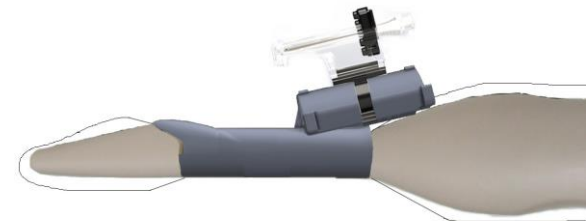

2c

3. Käyttöikä

Kun kertakäyttöistä, ei-steriiliä EV29L PrecisionPoint -sovitinta käytetään asianmukaisesti, sen käyttöikä on 3 kuukautta tai 75 uudelleenkäsittelyjaksoa, riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin.

Katso yksityiskohtaiset ohjeet seuraavista käyttöohjeista:

Vaihe	Käyttöohje	Käyttöohjeen osa
1. Uudelleenkäsittely (ennen ensimmäistä ja jokaista käyttökertaa)	EV29L:n hoito-, puhdistus- ja käyttöopas	Luku 4: Uudelleenkäsittely Osat 3.2, 3.3 ja 3.5: Uudelleenkäytettävien neulaohjaimien ja lisävarusteiden uudelleenkäsittely* * Puhdistus-, sterilointi- ja tarkastusohjeet koskevat myös uudelleenkäytettävää EV29L PrecisionPoint -sovitinta.
2. Kiinnittäminen EV29L-anturiin	EV29L:n hoito-, puhdistus- ja käyttöopas	Luku 3: Kuvantamisen valmistelu Osa 2.1.1: Neulaohjaimen kiinnittäminen* * Nämä ohjeet koskevat myös uudelleenkäytettävää EV29L PrecisionPoint -sovitinta.

Jos tarvitset **tekniistä apua** ExactVu™-mikroultraäänijärjestelmän tai uudelleenkäytettävän EV29L PrecisionPoint -sovittimen kanssa: Katso alueesi yhteystiedot osoitteesta <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+19054150030

info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

Vastuuhenkilö Yhdistyneessä
kuningaskunnassa

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**

Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ United Kingdom



Exact Imaging BVBA

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgium

Exact Imaging -luetteloviitteet

- EV-29L: EV29L-anturi
- EV-BIOGR-PP: EV29L uudelleenkäytettävä PrecisionPoint -sovitin
- EV-SYS-220: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ -mikroultraäänikuvantamisjärjestelmä (100V)