



Liste des produits chimiques approuvés pour les sondes ExactVu™

Type de produit chimique	Nom du produit chimique	Fabricant	Sonde transrectale			Sonde de surface	Durée de contact validée
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Nettoyant	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minute
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minute
Désinfectant de haut niveau	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minutes
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	45 minutes
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	×	✓	8 minutes
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	×	✓	8 minutes
Lingette/Aérosol	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	×	×	×	✓	30 secondes
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 secondes (sporicide)

* La FDA a admis que la « solution de dialdéhyde activé Metricide » fabriquée par Metrex Research, Inc. (glutaraldéhyde à 2,6 %, réutilisation 14 jours) était identique à Cidex®.

Tableau 1: Liste des produits chimiques approuvés

Les illustrations ci-dessous indiquent le *niveau de trempage* des sondes.

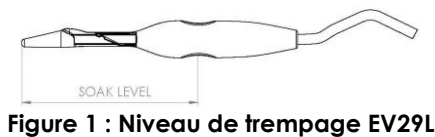


Figure 1 : Niveau de trempage EV29L

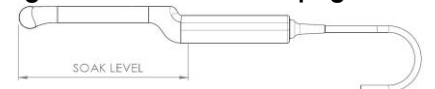


Figure 2 : Niveau de trempage EV9C



Figure 3 : Niveau de trempage EV5C

AVERTISSEMENT

EN-C25



Ne pas immerger la sonde au-delà de son niveau de trempage.

REMARQUE




Utilisez des produits de nettoyage et de désinfection dont l'emploi est approuvé dans votre région.

Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation de désinfectants et nettoyants.

Veuillez consulter les instructions relatives au reconditionnement de votre sonde entre les utilisations et l'emplacement de son niveau de trempage dans le *Guide d'entretien, de nettoyage et d'utilisation*.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com

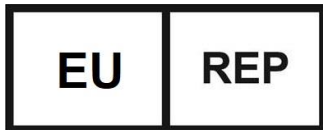

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Pays-Bas



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suisse



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgique

Personne
responsable au
Royaume-Uni

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Royaume-Uni

Trademarks

Marques commerciales Exact Imaging :

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® et ENZOL® sont des marques déposées de Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ est une marque de commerce de Steris Corporation. Resert® est une marque déposée de Steris Corporation.

Transeptic® est une marque déposée de Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ est une marque de commerce de CIVCO Medical Solutions.

Numéros de référence Exact Imaging

- EV-29L : Sonde EV29L
- EV-9C : Sonde EV9C
- EV-5C : Sonde EV5C
- EV-SYS-220 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (100V)

Informations sur la version

Système : Système de micro-échographie haute résolution ExactVu™

Liste des produits chimiques approuvés pour les sondes ExactVu™, Révision 2.1 (FR), traduction des instructions d'origine