

Kurzanleitung für nicht sterilen, wiederverwendbaren PrecisionPoint-Adapter EV29L

1. Wiederaufbereitung vor der ersten und jeder Verwendung

a. Reinigung Cidezyme, 5 Minuten

- Passende Bürste für Kanäle/Kanülen verwenden
- Alle Kanäle/Kanülen mit Reinigungsmittel spülen
- Nach der Reinigung 5 Minuten lang spülen.

b. Sterilisation


• Sterilisation: Autoklav der Klasse B

- 134 °C (273 °F) für 3 min
- 132 °C (270 °F) für 4 min

c. Überprüfung nach Wiederaufbereitung (keine sichtbaren Risse, Verfärbungen oder Schäden)

2. Anschließen der EV29L-Sonde


Montieren Sie den Kunststoffadapter oben auf der Schleuse. Befestigen Sie die beiden Arme der PrecisionPoint-Führung an den Seiten des Adapters. Die PrecisionPoint-Führung ist zum Einmalgebrauch bestimmt und sollte gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers verwendet werden.

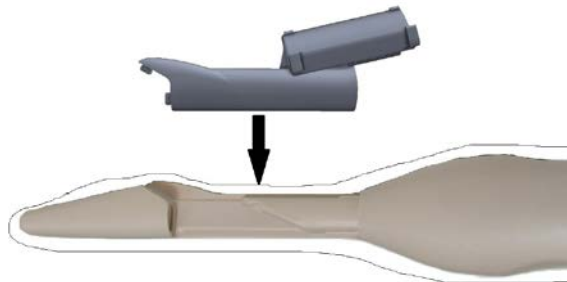

2a



2b

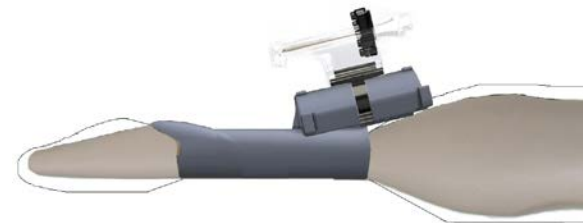

2c

3. Nutzungsdauer

Bei sachgemäßer Anwendung ist der nicht sterile, wiederverwendbare PrecisionPoint-Adapter EV29L für eine Nutzungsdauer von 3 Monaten oder 75 Wiederaufbereitungszyklen ausgelegt, je nachdem, was zuerst eintritt.

Siehe die folgenden Handbücher für detaillierte Anweisungen:

Schritt	Handbuch	Handbuchabschnitt
1. Wiederaufbereitung (vor der ersten und jeder Verwendung)	Handbuch zur Pflege, Reinigung und Verwendung von EV29L	Kapitel 4: Wiederaufbereitung Abschnitt 3.2, 3.3 und 3.5: Wiederaufbereitung wiederverwendbarer Nadelführungen und Zubehör* * Die Reinigungs-, Sterilisations- und Inspektionsanweisungen gelten auch für den wiederverwendbaren PrecisionPoint-Adapter EV29L.
2. Anschließen der EV29L-Sonde	Handbuch zur Pflege, Reinigung und Verwendung von EV29L	Kapitel 3: Vorbereitung für die Bildgebung Abschnitt 2.1.1: Anbringen der Nadelführung* * Diese Anweisungen gelten auch für den wiederverwendbaren PrecisionPoint-Adapter EV29L.

Wenn Sie **technische Unterstützung** in Verbindung mit dem ExactVu™-Mikro-Ultraschallsystem oder dem wiederverwendbaren PrecisionPoint-Adapter EV29L benötigen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Exact Imaging. Unter <https://www.exactimaging.com/contact-us> finden Sie die Kontaktinformationen für Ihre Region.



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1 905 415 0030

info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Niederlande



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Schweiz

Verantwortliche Person im Vereinigten
Königreich

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**

Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Vereinigtes Königreich



Exact Imaging BVBA

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgien

Exact Imaging-Bestellnummern

- EV-29L: EV29L-Sonde
- EV-BIOGR-PP: Wiederverwendbarer PrecisionPoint-Adapter EV29L
- EV-SYS-220: Mikro-Ultraschallbildgebungssystem ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Mikro-Ultraschallbildgebungssystem ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Mikro-Ultraschallbildgebungssystem ExactVu™ (100 V)