



Κατάλογος εγκεκριμένων χημικών ουσιών για ηχοβολείς ExactVu™

Τύπος χημικής ουσίας	Χημική ονομασία	Παρασκευαστής	Διορθικός ηχοβολέας			Επιφανειακός ηχοβολέας	Επικυρωμένος χρόνος επαφής
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Καθαριστικό	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 λεπτό
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 λεπτό
Απολυμαντικό ό υψηλού επιπέδου	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 λεπτά
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 λεπτά
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 λεπτά
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 λεπτά
Μαντηλάκι/ Σπρέι	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 δευτερόλεπτα
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 δευτερόλεπτα (σποροκτόνο)

* Ο FDA έχει αποδεχθεί ότι το «Ενεργοποιημένο διάλυμα διαλδεΐδης Metricide» που παρασκευάζεται από την Metrex Research, Inc. (2,6% γλουταραλδεΐδη, επαναχρησιμοποίηση στις 14 ημέρες) είναι πανομοιότυπο με το Cidex®.

Πίνακας 1: Κατάλογος εγκεκριμένων χημικών ουσιών


Οι παρακάτω εικόνες αποτυπώνουν το επίπεδο εμβάπτισης για τους ηχοβολείς.



Εικόνα 1: Επίπεδο εμβάπτισης EV29L



Εικόνα 3: Επίπεδο εμβάπτισης EV5C

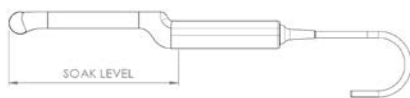

Εικόνα 2: Επίπεδο εμβάπτισης EV9C

ΠΡΟΣΟΧΗ

EN-C25



Μην βυθίζετε τον ηχοβολέα πέρα από το επίπεδο εμβάπτισής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης που είναι εγκεκριμένα για χρήση στην περιοχή σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του παρασκευαστή του απολυμαντικού ή καθαριστικού.

Ανατρέξτε στις Οδηγίες φροντίδας, καθαρισμού και χρήσης του ηχοβολέα σας για οδηγίες σχετικά με την επανεπεξεργασία ανάμεσα στις χρήσεις και τη θέση του επιπέδου εμβάπτισής του.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Ολλανδία



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Ελβετία



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Βέλγιο

Ηνωμένο Βασίλειο
Υπεύθυνο
πρόσωπο

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Ηνωμένο Βασίλειο

Εμπορικά σήματα

Εμπορικά σήματα της Exact Imaging:

- ExactVu™

Τα CIDEZYME®, CIDEX® και ENZOL® είναι σήματα κατατεθέντα της Johnson & Johnson.

Το Revital-Ox™ είναι εμπορικό σήμα της Steris Corporation. Το Resert® είναι σήμα κατατεθέν της Steris Corporation.

Το Transeptic® είναι σήμα κατατεθέν της Parker Laboratories Inc.

Το UltrOx™ είναι εμπορικό σήμα της CIVCO Medical Solutions.

Αριθμοί καταλόγου της Exact Imaging

- EV-29L: Ηχοβολέας EV29L
- EV-9C: Ηχοβολέας EV9C
- EV-5C: Ηχοβολέας EV5C
- EV-SYS-220: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (100V)

Πληροφορίες έκδοσης

Σύστημα: Σύστημα μικρο-υπερήχων υψηλής ανάλυσης ExactVu™

Κατάλογος εγκεκριμένων χημικών ουσιών για ηχοβολείς ExactVu™, Έκδοση 2.1 (EL), πρωτότυπο οδηγιών