

Οδηγός γρήγορης αναφοράς για τον διορθικό οδηγό βελόνας/βύσμα πολλαπλών χρήσεων EV29L

1. Επανεπεξεργασία πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση

- Αποσυναρμολογήστε τον πριν από την επανεπεξεργασία
- Καθαρισμός με Cidezyme, 5 λεπτά
 - Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη βούρτσα για τα κανάλια / τις κάνουλες
 - Ξεπλύνετε όλα τα κανάλια / τις κάνουλες με καθαριστικό
- Αποστείρωση
 - Αποστείρωση: Αυτόκαυστο Κλάσης Β
 - 134°C (273°F) για 3 λεπτά
 - 132°C (270°F) για 4 λεπτά
 - Εναλλακτικά (εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτόκαυστο) Απολύμανση υψηλού επιπέδου: Cidex OPA, 12 λεπτά
 - Ξεπλύνετε όλα τα κανάλια / τις κάνουλες με απολυμαντικό
- Επιθεώρηση μετά την επανεπεξεργασία

2. Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση*




3. Προσάρτηση στον ηχοβολέα EV29L

4. Ρυθμίσεις λογισμικού

- Λειτουργία αναισθησίας: Επιλέξτε **35°** για τη γωνία οδηγού βελόνας
- Λειτουργία βιοψίας: Δεν απαιτείται αλλαγή

*Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο για τη χρήση ως βύσμα (μόνο για διαδικασίες απεικόνισης).

**Τοποθετήστε το πλαστικό περίβλημα κάτω από το θηκάρι για χρήση ως βύσμα (μόνο για διαδικασίες απεικόνισης).

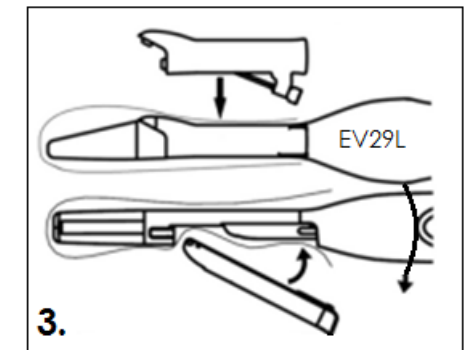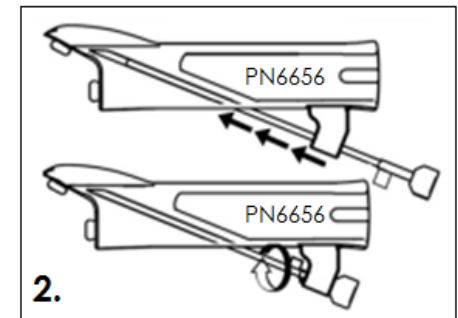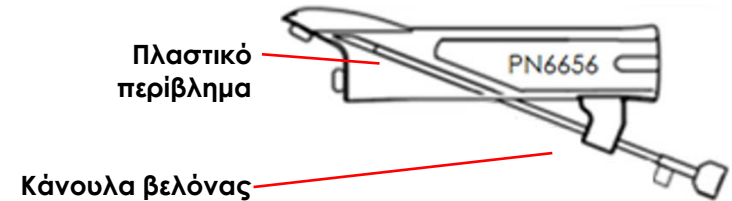

Ανατρέξτε στα ακόλουθα εγχειρίδια για λεπτομερείς οδηγίες:

Βήμα	Εγχειρίδιο	Ενότητα εγχειριδίου
1. Επανεπεξεργασία (πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση)	Οδηγίες φροντίδας, καθαρισμού και χρήσης για τον EV29L	Κεφάλαιο 4: Επανεπεξεργασία Ενότητα 3: Επανεπεξεργασία του διορθικού οδηγού βελόνας πολλαπλών χρήσεων EV29L
2. Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση		Κεφάλαιο 2: Γενικές πληροφορίες Ενότητα 2.2.2.3: Προετοιμασία του οδηγού βελόνας διορθικού για χρήση
3. Προσάρτηση στον ηχοβολέα EV29L		Κεφάλαιο 3: Προετοιμασία για απεικόνιση Ενότητα 2.1.1: Προσάρτηση του οδηγού βελόνας
4. Ρυθμίσεις λογισμικού	Εγχειρίδιο λειτουργίας και ασφάλειας ExactVu	Κεφάλαιο 5: Χρήση της δισδιάστατης λειτουργίας Ενότητα 2.3.1: Χρήση της επικάλυψης οδηγού βελόνας με τον ηχοβολέα EV29L

Εάν χρειαστείτε **τεχνική βοήθεια** με το σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ ή με τον διορθικό οδηγό βελόνας πολλαπλών χρήσεων EV29L, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας στη διεύθυνση <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Ολλανδία



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Ελβετία

Ηνωμένο Βασίλειο Υπεύθυνο πρόσωπο
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Ηνωμένο Βασίλειο



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Βέλγιο

Αριθμοί καταλόγου της Exact Imaging

- EV-29L: Ηχοβολέας EV29L
- EV-BIOGR: Διορθικός οδηγός βελόνας πολλαπλών χρήσεων EV29L, 18 GA
- EV-BIOG-R16: Διορθικός οδηγός βελόνας πολλαπλών χρήσεων EV29L, 16 GA
- EV-SYS-220: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (100V)