



Jóváhagyott vegyszerek listája az ExactVu™ transzducerekhez

Vegyszer típusa	Vegyszer neve	Gyártó	Transzrektális transzducer			Felszíni transzducer	Validált érintkezési idő
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Tisztítószer	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 perc
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 perc
Magas szintű fertőtlenítőszer	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 perc
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 perc
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 perc
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 perc
Törlés/permetezés	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 másodperc
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 másodperc (sporicid)


* Az FDA a Metrex Research, Inc. által gyártott „Metricide Activated Dialdehyde Solution” (2,6% glutáraldehid, 14 napos újr felhasználás) terméket a Cidex®-szel azonosként fogadta el®.

1. táblázat: Jóváhagyott vegyszerek listája

Az alábbi képek a transzducerek *áztatási szintvonalát* mutatják.



1. ábra: EV29L áztatási szintvonal

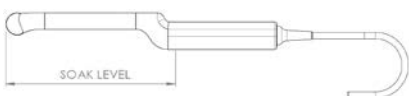

2. ábra: EV9C áztatási szintvonal



3. ábra: EV5C áztatási szintvonal

VIGYÁZAT

EN-C25



Ne merítse be a transzducert az áztatási szintvonalán túl.

MEGJEGYZÉS



Olyan tisztító és fertőtlenítő termékeket használjon, amelyek az Ön régiójában engedélyezettek.

A fertőtlenítő- és tisztítószeres esetében kövesse a gyártó használati utasításait.

A transzducer két használat közötti újrafeldolgozására vonatkozó utasításokat, valamint az áztatási szintvonal helyét a transzducerhez tartozó *Ápolási, tisztítási és használati útmutatóban* találja.



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030

info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Hollandia



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Svájc



Exact Imaging BVBA

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgium

UK Felelős
Személy

Emergo Consulting (UK) Limited c/o

Cr360 – UL International

Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Egyesült Királyság

Védjegyek

Az Exact Imaging védjegyei:

- ExactVu™

A CIDEZYME®, CIDEX® és az ENZOL® a Johnson & Johnson bejegyzett védjegyei.

A Revital-Ox™ a Steris Corporation védjegye. A Resert® a Steris Corporation bejegyzett védjegye.

A Transeptic® a Parker Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.

Az UltrOx™ a CIVCO Medical Solutions védjegye.

Exact Imaging katalógusszámok

- EV-29L: EV29L transzducer
- EV-9C: EV9C transzducer
- EV-5C: EV5C transzducer
- EV-SYS-220: ExactVu™ mikroultrahangos képalkotó rendszer (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ mikroultrahangos képalkotó rendszer (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ mikroultrahangos képalkotó rendszer (100V)

Verzióadatok

Rendszer: ExactVu™ nagy felbontású mikro-ultrahangrendszer

Jóváhagyott vegyszerek listája az ExactVu™ transzducerekhez, 2.1. felülvizsgálat (HU), *eredeti utasítások*