

# Gyorstájékoztató az EV29L nem steril, újrafelhasználható PrecisionPoint adapterhez

## 1. Újrafeldolgozás az első, illetve minden használat előtt

### a. Tisztítás: Cidezyme, 5 perc

- Használjon megfelelő kefét a csatornákhöz/kanülökhöz
- Öblítse át az összes csatornát/kanült tisztítószerrel
- Tisztítás után öblítse 5 percig.

### b. Sterilizálás


#### •Sterilizálás: B osztályú autoklávban

- 134°C (273°F) 3 percig
- 132°C (270°F) 4 percig

### c. Ellenőrzés az újrafeldolgozás után (nincs látható repedés, elszíneződés vagy sérülés)

## 2. Az EV29L transzducer csatlakoztatása


Helyezze a műanyag adaptert a hüvely tetejére. Csatlakoztassa a PrecisionPoint vezető mindkét karját az adapter oldalaihoz. A PrecisionPoint vezető egyszer használatos, és a gyártó használati utasításának megfelelően kell alkalmazni.

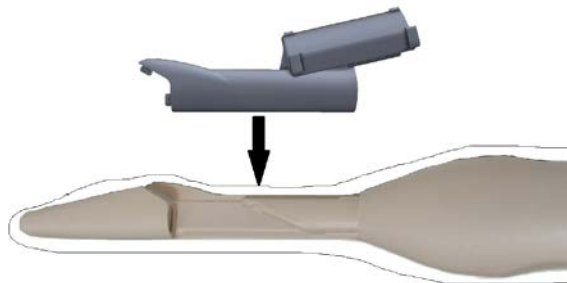

**2a**



**2b**

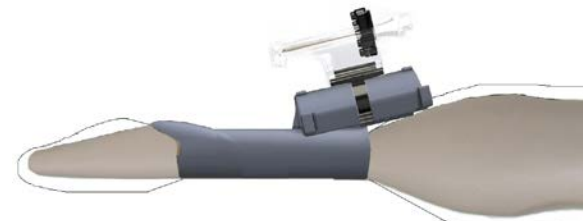

**2c**

### 3. Hasznos élettartam

Az EV29L nem steril, újrafelhasználható PrecisionPoint adapter tervezett élettartama körültekintő használat esetén 3 hónap vagy 75 újrafeldolgozási ciklus, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

A részletes utasításokat lásd a következő kézikönyvekben:

| Lépés                                                     | Kézikönyv                                               | A kézikönyv szakasza                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Újrafeldolgozás<br>(az első és minden használat előtt) | Ápolási, tisztítási és használati útmutató az EV29L-hez | 4. fejezet: Újrafeldolgozás<br>3.2, 3.3 és 3.5 szakasz: Újrafelhasználható tűvezetők és kiegészítők újrafeldolgozása*<br><br>*A tisztítási, sterilizálási és ellenőrzési utasítások az EV29L újrafelhasználható PrecisionPoint adapterre is vonatkoznak. |
| 2. Az EV29L transzducer csatlakoztatása                   | Ápolási, tisztítási és használati útmutató az EV29L-hez | 3. fejezet: Előkészítés a képalkotásra<br>2.1.1. szakasz: A tűvezető csatlakoztatása*<br><br>*Ezek az utasítások az EV29L újrafelhasználható PrecisionPoint adapterre is vonatkoznak.                                                                    |

Ha **műszaki segítségre** van szüksége az ExactVu™ mikroultrahang rendszerrel vagy az EV29L újrafelhasználható PrecisionPoint adapterrel kapcsolatban, forduljon az Exact Imaging műszaki támogatásához. Az Ön régiójára vonatkozó elérhetőségeket itt keresheti meg:  
<https://www.exactimaging.com/contact-us>.



**Exact Imaging Inc.**

7676 Woodbine Avenue, Unit 15  
Markham, ON L3R 2N2, Kanada  
+1 905 415 0030

[info@exactimaging.com](mailto:info@exactimaging.com)



**Emergo Europe**

Westervoortse dijk 60  
6827 AT Arnhem  
Hollandia



**MedEnvoy Switzerland**

Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Svájc

Felelős személy az Egyesült Királyságban

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o**

**Cr360 – UL International**

Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ Egyesült Királyság



**Exact Imaging BVBA**

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508  
9000 Gent  
Belgium

**Exact Imaging katalógusszámok**

- EV-29L: EV29L transzducer
- EV-BIOGR-PP: EV29L újrafelhasználható PrecisionPoint adapter
- EV-SYS-220: ExactVu™ mikroultrahangos képalkotó rendszer (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ mikroultrahangos képalkotó rendszer (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ mikroultrahangos képalkotó rendszer (100V)