



Elenco dei prodotti chimici approvati per i trasduttori ExactVu™

Tipo di prodotto chimico	Nome chimico	Produttore	Tipo di prodotto chimico			Nome chimico EV5C	Tempo di contatto convalidato
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-		
Detergente	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuto
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuto
Disinfettante ad alto livello	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minuti
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	45 minuti
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	×	✓	8 minuti
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	×	✓	8 minuti
Salvietta/spray	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	×	×	×	✓	30 secondi
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 secondes (sporicide)

* La FDA ha riconosciuto la "soluzione dialdeide attivata Metricide" prodotta da Metrex Research, Inc. (2,6% di glutaraldeide, riutilizzabile per 14 giorni) come identica a Cidex®.

Tabella 1: Elenco dei prodotti chimici approvati

Le immagini seguenti mostrano il *livello di immersione* per i trasduttori.

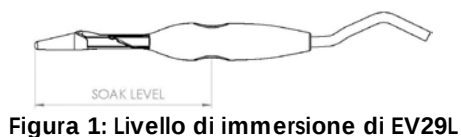


Figura 1: Livello di immersione di EV29L

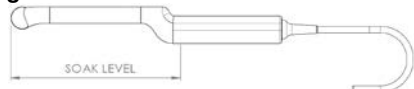


Figura 2: Livello di immersione di EV9C



Figura 3: Livello di immersione di EV5C

ATTENZIONE

EN-C25



Non immergere il trasduttore oltre il livello di immersione.

NOTA



Utilizzare prodotti di pulizia e disinfezione approvati per l'uso nel proprio paese.

Per disinfettanti e detergenti seguire le istruzioni per l'uso del produttore.

Fare riferimento alla *Guida alla cura, pulizia e uso del trasduttore transrettale*, relativa al trasduttore in uso, per istruzioni sul ricondizionamento tra un utilizzo e l'altro e l'ubicazione del *livello di immersione*.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Paesi Bassi



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Svizzera



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgio

Persona
Responsabile nel
Regno Unito

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Regno Unito

Marchi

Marchi di Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® ed ENZOL® sono marchi registrati di Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ è un marchio di Steris Corporation. Resert® è un marchio registrato di Steris Corporation.

Transeptic® è un marchio registrato di Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ è un marchio di CIVCO Medical Solutions.

Numero di catalogo Exact Imaging

- EV-29L: Trasduttore EV29L
- EV-9C: Trasduttore EV9C
- EV-5C: Trasduttore EV5C
- EV-SYS-220: Sistema di imaging a micro-ultrasuoni ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Sistema di imaging a micro-ultrasuoni ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Sistema di imaging a micro-ultrasuoni ExactVu™ (100V)

Informazioni sulla versione

Sistema: sistema a micro-ultrasuoni ad alta risoluzione ExactVu™

Elenco dei prodotti chimici approvati per i trasduttori ExactVu™, revisione 2.1 (IT), *traduzione delle istruzioni originali*