

EV29L 再利用可能ニードルガイド/プラグのクイックリファレンスガイド

1. 最初および毎回の使用前に再処理する

a. 再処理する前に分解する

b. 洗浄: サイデザイム、5 分

- ・ チャンネル/カニューレには適切なブラシを使用してください
- ・ すべてのチャンネル/カニューレをクリーナーで洗い流します。




c. 殺菌

● 滅菌：クラス B オートクレーブ


- 134°C (273°F) 3 分間
- 132°C (270°F) 4 分間
- 代わりに(オートクレーブが利用できない場合)高度な消毒: Cidex OPA、12 分
- すべてのチャンネル/カニューレを消毒剤で洗い流します。

d. 再処理後の検査

2. 組立・分解*

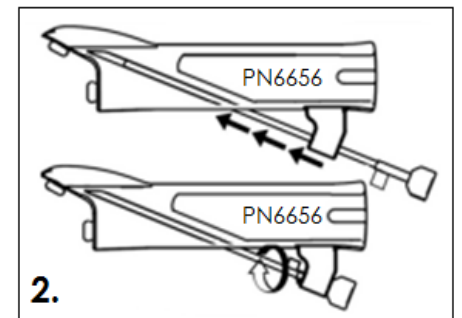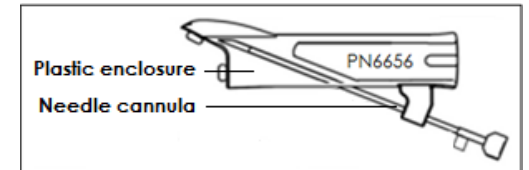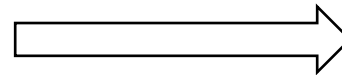


3. EV29L トランスデューサへの取り付け**

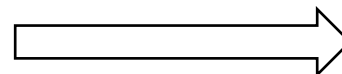

4. ソフトウェアの調整

- a. 麻酔モード: ニードルガイド角度 35°オプションを選択します。
- b. 生検モード: 変更の必要はありません。

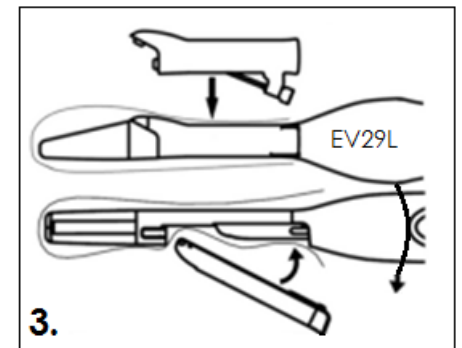

*プラグとして使用する場合、この手順は必要ありません（イメージングのみの手順の場合）。

**プラグとして使用するために、シースの下にプラスチック製のエンクロージャを取り付けます（イメージング用）。

詳細な手順については、次のマニュアルを参照してください。

ExactVu™ マイクロ超音波システムまたは EV29L 再利用可能ニードル ガイドに関する技術サポートが必要な場合、

ステップ	マニュアル	マニュアルのセクション
1.再処理 (初回および毎回の使用前)	EV29L™経直腸用リニア型 マイクロ超音波トランス デューサのケア、清掃 及び使用ガイド	第 4 .再処理 セクション 3: EV29L 経直腸再利用可能針ガイドの再処理
2.組立・分解		第 2 章: 一般情報 セクション 2.2.2.3:経直腸針ガイドの使用準備
3. EV29L トランスデューサへの取り付け		第 3 章: イメージングの準備 セクション 2.1.1: ニードル ガイドの取り付け
4.ソフトウェアの調整	操作・安全マニュアル ExactVu™高解像度 マイクロ超音波システム	第 5 章: 2D モードの使用 セクション 2.3.1: EV29L トランスデューサでのニードル ガイド オー バーレイの使用

<https://www.exactimaging.com/contact-us> にあるお住まいの地域の連絡先情報を使用してテクニカル サポートにお問い合わせください。



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands