




Patvirtintų cheminių medžiagų sąrašas ExactVu™ keitikliams

Cheminės medžiagos tipas	Cheminės medžiagos pavadinimas	Gamintojas	Transrektalinis keitiklis			Paviršiaus keitiklis EV5C	Validuota kontakto trukmė
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-		
Valiklis	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minutė
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minutė
Aukšto lygio dezinfektantas	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minučių
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minutės
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minutės
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minutės
Nušluostyti-te / purškite	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 sekundžių
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekundžių (sporicidinis)


* FDA pripažino tirpalą Metricide Activated Dialdehyde Solution, pagamintą „Metrex Research, Inc.“ (2,6 % glutaraldehido, 14 dienų pakartotiniam naudojimui), kaip identišką Cidex®.

1 lentelė. Patvirtintų cheminių medžiagų sąrašas


Toliau pateiktuose paveikslėliuose parodytas keitiklių *mirkymo lygis*.

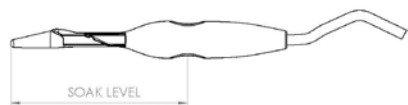

1 pav. EV29L mirkymo lygis

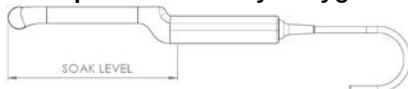

2 pav. EV29L mirkymo lygis

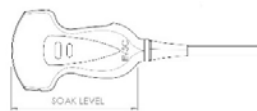

3 pav. EV29L mirkymo lygis

PERSPĖJIMAS

EN-C25



Nepanardinkite keitiklio giliau mirkymo lygio.

PASTABA



Naudokite valymo ir dezinfekcijos priemones, kurios yra patvirtintos naudoti jūsų regione.

Laikykitės dezinfekantų ir valiklių gamintojų išleistų naudojimo instrukcijų.

Skaitykite savo keitiklio *priežiūros, valymo ir naudojimo vadove* pateiktas instrukcijas apie tai, kaip pakartotinai apdoroti keitiklį tarp naudojamų ir kur yra jo *mirkymo lygis*.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nyderlandai



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Šveicarija



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgija

Jungtinė
Karalystė
Atsakingas
asmuo

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Jungtinė Karalystė

Prekių ženklai

„Exact Imaging“ prekių ženklai:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® ir ENZOL® yra „Johnson & Johnson“ registruotieji prekių ženklai.

Revital-Ox™ yra „Steris Corporation“ prekių ženklas. Resert® yra „Steris Corporation“ registruotasis prekių ženklas.

Transeptic® yra „Parker Laboratories Inc.“ registruotasis prekių ženklas.

UltrOx™ yra bendrovės „CIVCO Medical Solutions“ prekių ženklas.

„Exact Imaging“ katalogo numeriai

- EV-29L: EV29L keitiklis
- EV-9C: EV9C keitiklis
- EV-5C: EV5C keitiklis
- EV-SYS-220: ExactVu™ mikroultragarsinė vaizdinimo sistema (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ mikroultragarsinė vaizdinimo sistema (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ mikroultragarsinė vaizdinimo sistema (100V)

Versijos informacija

Sistema: ExactVu™ didelės skiriamosios gebos mikroultragarsinė sistema

Patvirtintų cheminių medžiagų sąrašas ExactVu™ keitikliams, 2.1 (LT) leidimas, *originali instrukcija*