

EV29L nesterilaus daugkartinio naudojimo PrecisionPoint adapterio greitojo naudojimo vadovas

1. Prieš pirmąjį ir kiekvieną naudojimą

a. Cidezme valymas, 5 minutės

- Naudokite tinkamą šepetėlį kanalams/kanulėms
- Visus kanalus/kanules praplaukite valikliu.
- Po valymo skalaukite 5 minutes.

b. Sterilizavimas


• Sterilizavimas: B klasės autoklavas

- 134°C (273°F) - 3 min
- 132°C (270°F) - 4 min

c. Patikrinimas po perdirbimo (nėra matomų įtrūkimų, spalvos pakitimų ar pažeidimų)

2. Prijungimas prie EV29L keitiklio

Plastikinį adapterį pritvirtinkite ant apvalkalo viršaus. Kiekvieną PrecisionPoint kreiptuvo rankenėlę pritvirtinkite prie adapterio šonų. PrecisionPoint kreiptuvas yra vienkartinis ir turi būti naudojamas pagal gamintojo naudojimo instrukcijas.

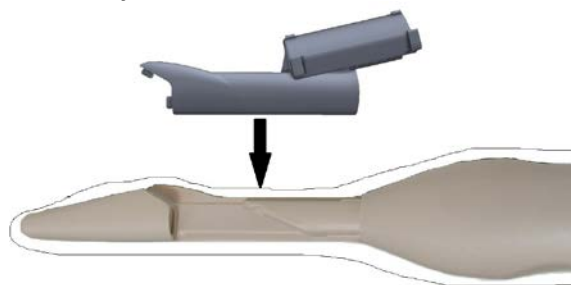

2a



2b



2c

3. Darbo trukmė

Tinkamai naudojamas EV29L nesterilus daugkartinio naudojimo PrecisionPoint adapteris yra skirtas naudoti 3 mėnesius arba 75 perdirbimo ciklus, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Išsamias instrukcijas rasite šiuose vadovuose:

Žingsnis	Vadovas	Vadovo skyrius
1. Perdirbimas (prieš pirmąjį ir kiekvieną naudojimą)	EV29L priežiūros, valymo ir naudojimo instrukcija	4 skyrius: Perdirbimas 3.2, 3.3 ir 3.5 skirsniai: Pakartotinai naudojamų adatų kreipiamųjų ir priedų perdirbimas* * Valymo, sterilizavimo ir tikrinimo instrukcijos taip pat taikomos EV29L daugkartinio naudojimo PrecisionPoint adapteriui.
2. Prijungimas prie EV29L keitiklio	EV29L priežiūros, valymo ir naudojimo instrukcija	3 skyrius: Pasirengimas vaizdo gavimo procedūrai 2.1.1 skyrius: Adatos kreiptuvo pritvirtinimas* * Šios instrukcijos taip pat taikomos EV29L daugkartinio naudojimo PrecisionPoint adapteriui.

Jei reikalinga techninė pagalba dėl „ExactVu™“ mikroultragarso sistemos arba EV29L daugkartinio naudojimo „PrecisionPoint“ adapterio, kreipkitės į „Exact Imaging“ techninės pagalbos tarnybą. Savo regiono kontaktinę informaciją rasite adresu <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
T Nyderlandai



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Šveicarija

Atsakingas asmuo Jungtinėje Karalystėje
Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Jungtinė Karalystė



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gentas
Belgija

Tikslūs vaizdo gavimo kataloginiai numeriai

- EV-29L: EV29L keitiklis
- EV-BIOGR-PP: EV29L daugkartinio naudojimo PrecisionPoint adapteris
- • EV-SYS-220: ExactVu™ mikro ultragarso vaizdo gavimo sistema (220 V)
- • EV-SYS-120: ExactVu™ mikro ultragarso vaizdo gavimo sistema (120 V)
- • EV-SYS-100: ExactVu™ mikro ultragarso vaizdo gavimo sistema (100 V)