

EV29L daugkartinio adatos kreiptuvo / kaiščio trumpasis vadovas

1. Pakartotinis apdorojimas prieš pirmąjį ir kiekvieną tolesnį naudojimą

- Išardykite prieš pakartotinį apdorojimą
- Valymas: Cidezyme, 5 minutės
 - Naudokite tinkamą šepetėlį kanalams / kaniulėms
 - Praplaukite visus kanalus / kaniules valikliu
- Sterilizacija
 - Sterilizacija: B klasės autoklavas
 - 134 °C (273 °F) 3 min.
 - 132 °C (270 °F) 4 min.
 - Arba (jei nėra autoklavo) aukšto lygio dezinfekcija: Cidex OPA, 12 minučių
 - Praplaukite visus kanalus / kaniules dezinfekantu
- Patikra po pakartotinio apdorojimo

1. Surinkimas / išardymas*




2. Pritvirtinimas prie EV29L keitiklio**

3. Programinės įrangos nustatymai

- Anestezijos režimas: Pasirinkite adatos kreiptuvo kampo **35°** parinktį
- Biopsijos režimas: Nieko keisti nereikia

*Šio žingsnio nereikia atlikti, jei naudojamas kaip kaištis (vien vaizdinimo procedūroms).

**Pakiškite plastikinį korpusą po mova, kad būtų galima naudoti kaip kaištį (vien vaizdinimo procedūroms).

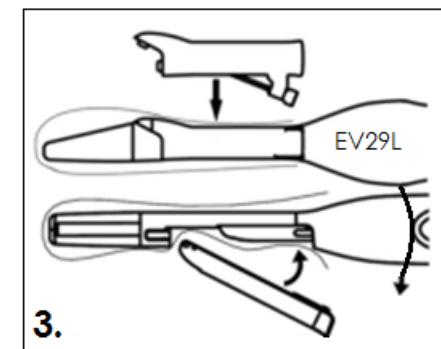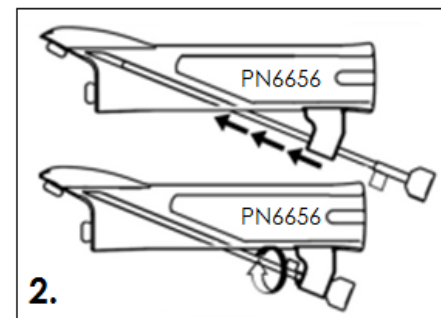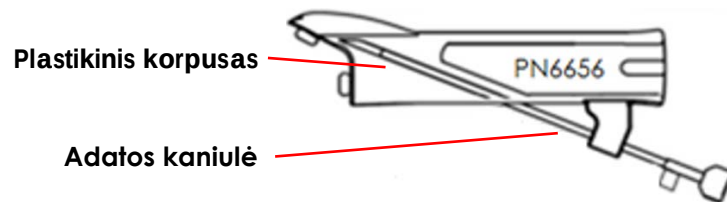

Išsamias instrukcijas žr. toliau nurodytuose vadovuose:

Žingsnis	Vadovas	Vadovo skyrius
1. Pakartotinis apdorojimas (prieš pirmąjį ir kiekvieną tolesnį naudojimą)	EV29L priežiūros, valymo ir naudojimo vadovas	4 skyrius. Pakartotinis apdorojimas 3 skirsnis. EV29L daugkartinio transrektalinės adatos kreiptuvo kartotinis apdorojimas
2. Surinkimas / išardymas		2 skyrius. Bendroji informacija 2.2.2.3 skirsnis. Adatos kreiptuvo paruošimas transrektalinės naudojimui
3. Pritvirtinimas prie EV29L keitiklio		3 skyrius. Pasiruošimas vaizdinimui 2.1.1 skirsnis. Adatos kreiptuvo pritvirtinimas
4. Programinės įrangos nustatymai	ExactVu eksploatavimo ir saugos vadovas	5 skyrius. 2D režimo naudojimas 2.3.1 skirsnis. Adatos kreiptuvo denginio naudojimas su EV29L keitikliu

Jei reikia **techninės pagalbos**, susijusios su ExactVu™ mikroultragarsine sistema arba EV29L EV29L daugkartinis transrektalinės adatos kreiptuvas, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą, naudodami savo regiono kontaktinę informaciją adresu <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nyderlandai



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Šveicarija

Jungtinė Karalystė Atsakingas asmuo
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Jungtinė Karalystė



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgija

Numéros de référence Exact Imaging

- EV-29L: EV29L keitiklis
- EV-BIOGR: EV29L daugkartinis transrektalinės adatos kreiptuvas, 18 GA
- EV-BIOG-R16: EV29L daugkartinis transrektalinės adatos kreiptuvas, 16 GA
- EV-SYS-220: ExactVu™ mikroultragarsinė vaizdinimo sistema (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ mikroultragarsinė vaizdinimo sistema (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ mikroultragarsinė vaizdinimo sistema (100V)