

# Liste over godkjente kjemikalier for ExactVu™-prober

Type kjemikalie	Kjemisk navn	Produsent	Transrektal probe			Overflate- probe	Validert kontaktid
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Rengjøringsmi- ddel	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minutt
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minutt
Høynivå- desinfeks- jonsmiddel	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minutter
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minutter
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minutter
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minutter
Serviett/ spray	Aérosol Transeptic®	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 sekunder
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekunder (sporicid)

\* FDA har godkjent «Metricid, aktivert dialdehydløsning» produsert av Metrex Research, Inc. (2,6 % glutaraldehyd, 14 dagers gjenbruk) som identisk med Cidex®.

**Tabell 1: Liste over godkjente kjemikalier**

**MERK**



Bruk rengjørings- og desinfeksjonsprodukter som er godkjente for bruk i din region.

Følg produsentens bruksanvisning for desinfeksjons- og rengjøringsmidler.


Se *Veiledning for vedlikehold, rengjøring og bruk* for din probe for instruksjoner om hvordan preparere proben mellom hver bruk, og hvor *bløtleggingsnivået* er.

Bildene under viser *bløtleggingsnivået* for probene.

## Liste over godkjente kjemikalier for ExactVu™-prober



**Figur 1: EV29L-bløtleggingsnivå**

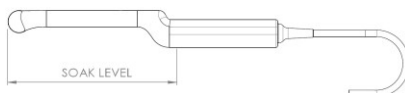

**Figur 2: EV9C-bløtleggingsnivå**



**Figur 3: Bløtleggingsnivå for EV5C**

### **FORSIKTIG**

EN-C25



---

Ikke senk proben lenger enn til bløtleggingsnivået.

---

## Liste over godkjente kjemikalier for ExactVu™-prober

### Forord



**Exact Imaging Inc.**  
7676 Woodbine Avenue, Unit 15  
Markham, ON L3R 2N2, Canada  
+1.905.415.0030  
info@exactimaging.com



**Emergo Europe**  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Nederland



**EDAP TMS**  
4, rue du Dauphiné  
69120 Vaulx-en-Velin  
Frankrike



### Varemerker

Exact Imaging-varemerker:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® og ENZOL® er registrerte varemerker for Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ er et varemerke for Steris Corporation. Resert® er et registrert varemerke for Steris Corporation.

Transeptic® er et registrert varemerke for Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ er et varemerke for CIVCO Medical Solutions.

### Exact Imaging-katalognumre

- EV-29L: EV29L-probe
- EV-9C: EV9C-probe
- EV-5C: EV5C-probe
- EV-SYS-220: ExactVu™-mikro-ultralydbildesystem (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™-mikro-ultralydbildesystem (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™-mikro-ultralydbildesystem (100V)

### Versjonsinformasjon

System: ExactVu™-mikro-ultralydsystem med høy oppløsning

Liste over godkjente kjemikalier for ExactVu™-prober, revisjon 1.9 (NO), *oversettelse av de originale instruksjonene*

