




Liste over godkjente kjemikalier for ExactVu™-prober

Type kjemikalie	Kjemisk navn	Produsent	Transrektal probe			Overflate-probe	Validert kontaktid
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Rengjøringsmiddel	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minutt
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minutt
Høynivå-desinfeksjonsmiddel	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minutter
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	45 minutter
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	×	✓	8 minutter
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	×	✓	8 minutter
Serviett/spray	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	×	×	×	✓	30 sekunder
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekunder (sporicid)


* FDA har godkjent «Metricid, aktivert dialdehydløsning» produsert av Metrex Research, Inc. (2,6 % glutaraldehyd, 14 dagers gjenbruk) som identisk med Cidex®.

Tabell 1: Liste over godkjente kjemikalier


Bildene under viser *bløtleggingsnivået* for probene.

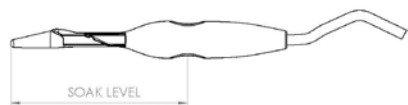

Figur 1: EV29L-bløtleggingsnivå

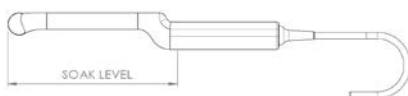

Figur 2: EV9C-bløtleggingsnivå

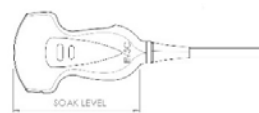

Figur 3: Bløtleggingsnivå for EV5C

FORSIKTIG
EN-C25



Ikke senk proben lenger enn til bløtleggingsnivået.

MERK



Bruk rengjørings- og desinfeksjonsprodukter som er godkjente for bruk i din region.

Følg produsentens bruksanvisning for desinfeksjons- og rengjøringsmidler.

Se *Veiledning for vedlikehold, rengjøring og bruk* for din probe for instruksjoner om hvordan preparere proben mellom hver bruk, og hvor *bløtleggingsnivået* er.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Sveits



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

UK ansvarlig
person

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Storbritannia

Varemerker

Exact Imaging-varemerker:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® og ENZOL® er registrerte varemerker for Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ er et varemerke for Steris Corporation. Resert® er et registrert varemerke for Steris Corporation.

Transeptic® er et registrert varemerke for Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ er et varemerke for CIVCO Medical Solutions.

Exact Imaging-katalognumre

- EV-29L: EV29L-probe
- EV-9C: EV9C-probe
- EV-5C: EV5C-probe
- EV-SYS-220: ExactVu™-mikro-ultralyd bildesystem (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™-mikro-ultralyd bildesystem (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™-mikro-ultralyd bildesystem (100V)

Versjonsinformasjon

System: ExactVu™-mikro-ultralydssystem med høy oppløsning

Liste over godkjente kjemikalier for ExactVu™-prober, revisjon 2.1 (NO), *oversettelse av de originale instruksjonene*