

Hurtigveiledning for EV29L Ikke-steril gjenbrukbar PrecisionPoint-adapter

1. Reprosessering før første bruk og før hver bruk

a. Rengjøring Cidezyme, 5 minutter

- Bruk en passende børste for kanaler/kanyler
- Skyll alle kanaler/kanyler med rengjøringsmiddel
- Skyll i 5 minutter etter rengjøring.

b. Sterilisering


• Sterilisering: Klasse B-autoklav

- 134 °C (273 °F) i 3 minutter
- 132 °C (270 °F) i 4 minutter

c. Inspeksjon etter reprosessering (ingen synlige sprekker, misfarging eller skader)

2. Feste til EV29L-proben


Monter plastadapteren øverst på hylsen. Fest begge armene på PrecisionPoint-guiden til sidene på adapteren. PrecisionPoint-guiden er til engangsbruk og skal brukes i henhold til produsentens brukerveiledning.

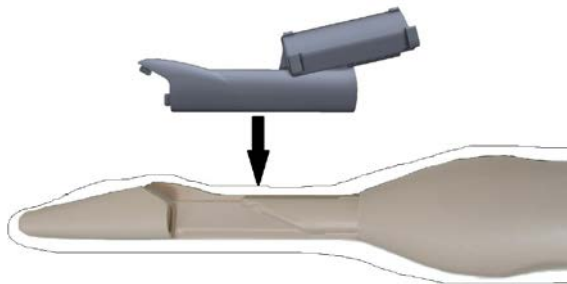

2a



2b

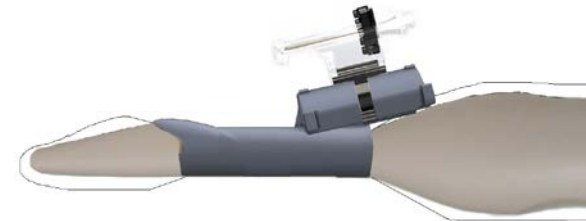

2c

3. Levetid

EV29L Ikke-steril gjenbrukbar PrecisionPoint-adapter er designet for en levetid på 3 måneder eller 75 reprosesseringscykluser (det som inntreffer først) når den brukes riktig og forsvarlig.

Se følgende håndbøker for detaljerte instruksjoner:

Trinn	Håndbok	Avsnitt i håndboken
1. Reprosessering (før første bruk og før hver bruk)	Veiledning for vedlikehold, rengjøring og bruk for EV29L	Kapittel 4: Reprosessering Avsnitt 3.2, 3.3 og 3.5: Reprosessering av gjenbrukbare nålførere og tilbehør* * Instruksjonene for rengjøring, sterilisering og inspeksjon gjelder også for EV29L Gjenbrukbar PrecisionPoint-adapter
2. Feste til EV29L Probe	Veiledning for vedlikehold, rengjøring og bruk for EV29L	Kapittel 3: Klargjøring før avbildning Avsnitt 2.1.1: Feste nålføreren* * Disse instruksjonene gjelder også for EV29L Gjenbrukbar PrecisionPoint-adapter.

Om du behøver **teknisk hjelp** med ditt ExactVu™-mikro-ultralydssystem eller med EV29L Gjenbrukbar PrecisionPoint-adapter, kontakt serviceteknikere fra Exact Imaging. Se <https://www.exactimaging.com/contact-us> for å finne kontaklinformasjon for din region.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1 905 415 0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Sveits

Ansvarlig person i Storbritannia
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Storbritannia



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Exact Imaging-katalognumre

- EV-29L: EV29L Probe
- EV-BIOGR-PP: EV29L Gjenbrukbar PrecisionPoint-adapter
- EV-SYS-220: ExactVu™-mikro-ultralydssystem (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™-mikro-ultralydssystem (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™-mikro-ultralydssystem (100 V)