
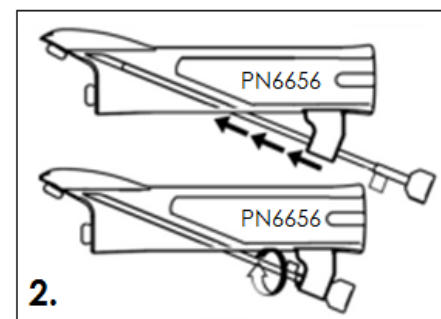



Hurtigveiledning for gjenbrukbar EV29L-nålfører/plugg

1. Reprosessering før første bruk og før hver bruk

- a. Demonter før reprosessering
- b. Rengjøring: Cidezyme, 5 minutter
 - Bruk en passende børste for kanaler/kanyler
 - Skyll alle kanaler/kanyler med rengjøringsmiddel
- c. Sterilisering
 - Sterilisering: Klasse B-autoklav
 - 134 °C (273 °F) i 3 minutter
 - 132 °C (270 °F) i 4 minutter
 - Eventuelt (om autoklav ikke er tilgjengelig) høynivådesinfeksjon: Cidex OPA, 12 minutter
 - Skyll alle kanaler/kanyler med desinfeksjonsmiddel
- d. Inspeksjon etter reprosessering

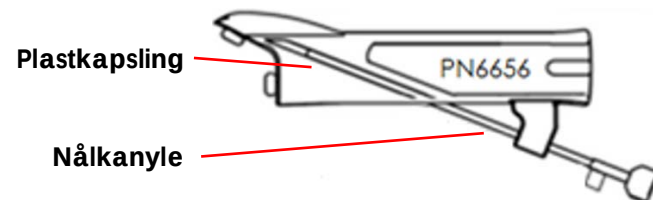

2.

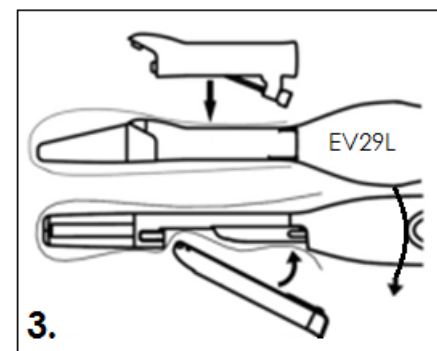

3.

1. Montering/demontering*

2. Feste til EV29L-proben**

3. Programvarejusteringer

- a. Anestesimodus: Velg alternativet **35°** for nålførervinkel
- b. Biopsimodus: Ingen endring nødvendig.

*Dette trinnet er ikke nødvendig for bruk som plugg (for prosedyrer med kun avbildning).

**Installer plastkapslingen under hylsen for bruk som plugg (for prosedyrer med kun avbildning).

Se følgende håndbøker for detaljerte instruksjoner:

Trinn	Håndbok	Avsnitt i håndboken
1. Reprosessering (før første bruk og før hver bruk)	Veiledning for vedlikehold, rengjøring og bruk for EV29L	Kapittel 4: Reprosessering Avsnitt 3: Preparering av gjenbrukbar transrektal EV29L-nålfører
2. Montering/demontering		Kapittel 2: Generell informasjon Avsnitt 2.2.2.3: Klargjøring av transrektal nålføreren for bruk
3. Feste til EV29L-Proben		Kapittel 3: Klargjøring før avbildning Avsnitt 2.1.1: Feste nålføreren
4. Programvarejusteringer	Drifts- og sikkerhetshåndbok for ExactVu	Kapittel 5: Bruk 2D-modus Avsnitt 2.3.1: Bruk av nålføreroverlegget med EV29L-proben

Om du behøver **teknisk hjelp** med ditt ExactVu™-mikro-ultralydssystem eller med den gjenbrukbar, transrektal EV29L-nålfører, kontakt teknisk støtte ved å bruke kontaktinformasjonen for din region på <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Sveits

UK ansvarlig person
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Storbritannia



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Exact Imaging-katalognummer

- EV-29L: EV29L-probe
- EV-BIOGR: Gjenbrukbar, transrektal EV29L-nålfører, 18 GA
- EV-BIOG-R16: Gjenbrukbar, transrektal EV29L-nålfører, 16 GA
- EV-SYS-220: ExactVu™-mikro-ultralyd bildesystem (220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™-mikro-ultralyd bildesystem (120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™-mikro-ultralyd bildesystem (100V)