

Skrócona instrukcja obsługi do przezodbytniczego przewodnika/wkładu igły wielokrotnego użytku EV29L

1. Regeneracja przed pierwszym użyciem oraz przed każdym następnym użyciem

- Demontaż przed przeprowadzeniem regeneracji
- Czyszczenie – Cydezym, 5 minut
 - Użyć odpowiedniej szczoteczki do czyszczenia kanałów/kaniuli
 - Przepłukać wszystkie kanały/kaniule środkiem czyszczącym
- Sterylizacja
 - Sterylizacja: Autoklaw klasy B
 - 134°C przez 3 minuty
 - 132°C przez 4 minuty
 - Alternatywnie (jeśli autoklaw nie jest dostępny) przeprowadzić dezynfekcję wysokiego stopnia – Cidex OPA, 12 minut
 - Przepłukać wszystkie kanały/kaniule środkiem dezynfekującym
- Kontrola po regeneracji

2. Montaż/Demontaż*




3. Mocowanie do przetwornika EV29L

4. Dostosowanie oprogramowania

- Tryb znieczulenia (Anesthesia): wybrać opcję **35°** dla kąta przewodnika igły
- Tryb biopsji (Biopsy): nie jest wymagana żadna zmiana

*Ten krok nie jest wymagany w przypadku stosowania jako wkład (w przypadku procedur wyłącznie obrazowych).

**Zainstalować plastikową obudowę pod osłoną w przypadku stosowania jako wkład (w przypadku procedur wyłącznie obrazowych).

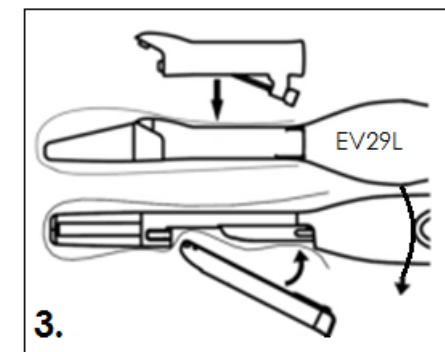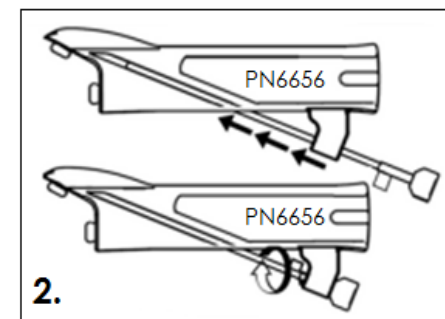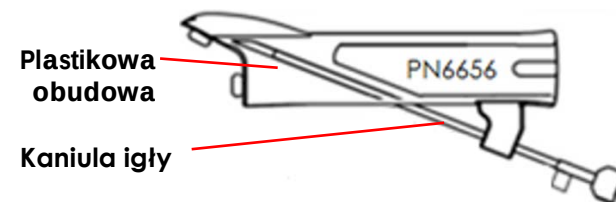

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w następujących Instrukcjach obsługi:

Etap	Instrukcja obsługi	Punkt w instrukcji
1. Regeneracja (przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem)	Instrukcja konserwacji, czyszczenia i użytkowania dla EV29L	Rozdział 4: Regeneracja Punkt 3: Przeprowadzanie regeneracji przezodbytniczego przewodnika igły wielokrotnego użytku EV29L
2. Montaż/Demontaż		Rozdział 2: Informacje ogólne Punkt 2.2.2.3: Przygotowanie przewodnika igły do użycia
3. Mocowanie do przetwornika EV29L		Rozdział 3: Przygotowanie do obrazowania Punkt 2.1.1: Mocowanie przewodnika igły przezodbytniczego
4. Dostosowanie oprogramowania	Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa ExactVu	Rozdział 5: Korzystanie z trybu 2D Punkt 2.3.1: Korzystanie z nakładki przewodnika igły z przetwornikiem EV29L

W razie potrzeby skorzystania z **pomocy technicznej** dotyczącej systemu mikro-USG ExactVu™ lub przezodbytniczego przewodnika igły wielokrotnego użytku EV29L skontaktuj się z Pomocą Techniczną, korzystając z informacji kontaktowych dla swojego regionu na stronie <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Niderlandy



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Szwajcaria

Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Wielka Brytania



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Numery katalogowe firmy Exact Imaging

- EV-29L: Przetwornik EV29L
- EV-BIOGR: Przezodbytniczy przewodnik igły wielokrotnego użytku EV29L, rozmiar 18 GA
- EV-BIOG-R16: Przezodbytniczy przewodnik igły wielokrotnego użytku EV29L, rozmiar 16 GA
- EV-SYS-220: System obrazowania mikro-USG ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: System obrazowania mikro-USG ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: System obrazowania mikro-USG ExactVu™ (100 V)