

Lista de produtos químicos aprovados para transdutores ExactVu™

Tipo de produto químico	Nome do produto químico	Fabricante	Transdutor transretal			Transdutor de superfície	Tempo de contacto validado
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Produto de limpeza	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuto
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuto
Desinfetante de alto nível	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minutos
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minutos
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minutos
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minutos
Toallete/pulverizador	Pulverizador Transeptic®	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 segundos
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 segundos (esporicida)

* A FDA aceitou a "Metricide Activated Dialdehyde Solution" fabricada pela Metrex Research, Inc. (2,6% de glutaraldeído, 14 dias de reutilização) como idêntica ao Cidex®.

Tabela 1: Lista de produtos químicos aprovados

As imagens abaixo indicam o nível de imersão para os transdutores.



Figura 1: Nível de imersão do EV29L

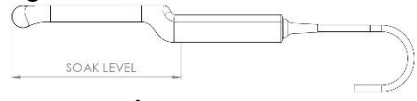


Figura 2: Nível de imersão do EV9C



Figura 3: Nível de imersão do EV5C

CUIDADO

EN-C25



Não mergulhe o transdutor para além do respetivo nível de imersão.

NOTA



Utilize produtos de limpeza e desinfecção aprovados para utilização na sua região. Siga as instruções do fabricante para a utilização de desinfetantes e produtos de limpeza.

Consulte o *Guia de cuidados, limpeza e utilização* do seu transdutor para obter instruções sobre o reprocessamento entre utilizações e a localização do nível de imersão.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canadá
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Países Baixos



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suíça



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808/b508
9000 Gent
Bélgica

Responsável no
Reino Unido

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Reino Unido

Marcas registradas

Marcas registradas da Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® e ENZOL® são marcas registradas da Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ é uma marca registrada da Steris Corporation. Reserf® é uma marca registrada da Steris Corporation.

Transeptic® é uma marca registrada da Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ é uma marca registrada da CIVCO Medical Solutions.

Referências da Exact Imaging

- EV-29L: Transdutor EV29L
- EV-9C: Transdutor EV9C
- EV-5C: Transdutor EV5C
- EV-SYS-220: Sistema de imagiologia de microultrassons ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Sistema de imagiologia de microultrassons ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Sistema de imagiologia de microultrassons ExactVu™ (100 V)

Informações sobre a versão

Sistema: Sistema de microultrassons de elevada resolução ExactVu™

Lista de produtos químicos aprovados para transdutores ExactVu™, Revisão 2.1 (PT), *instruções originais*

