

# Lista substanțelor chimice aprobate pentru transductoarele ExactVu™

Tipul substanței chimice	Denumirea chimică	Producător	Transductor transrectal			Transductor de suprafață	Timpul de contact validat
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Soluție de curățare	CIDEZYME®	Produse de sterilizare avansată	✓	✓	✓	x	1 minut
	ENZOL®	Produse de sterilizare avansată	✓	✓	✓	x	1 minut
Dezinfectant de nivel înalt	CIDEX® OPA	Produse de sterilizare avansată	✓	✓	✓	✓	12 minute
	CIDEX®	Produse de sterilizare avansată	✓	✓	✓	x	45 minute
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minute
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minute
Ștergere/ Pulverizare	Aérosol Transeptic®	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 secunde
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 secunde (sporicid)

\* FDA a acceptat "Metricide Activated Dialdehyde Solution" (Soluție de dialdehidă activată Metricide) produsă de Metrex Research, Inc. (2,6% glutaraldehidă, reutilizare la 14 zile) ca fiind identic cu Cidex®.

**Tabelul 1: Lista substanțelor chimice aprobate**

**NOTĂ**



Utilizați produsele de curățare și dezinfectare care sunt aprobate pentru utilizare în regiunea dvs.

Urmați instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru utilizarea soluțiilor dezinfectante și de curățare.

Consultați *Care, Cleaning, and Use Guide (Ghidul de îngrijire, curățare și utilizare)* pentru transductorul dvs. cu privire la instrucțiunile de reprocesare a acestuia între utilizări și localizarea nivelului de cufundare a acestuia.

Imaginile de mai jos prezintă nivelul de cufundare pentru transductori.

Lista substanțelor chimice aprobate pentru transductorii ExactVu™



Figura 1: Nivel de cufundare EV29L

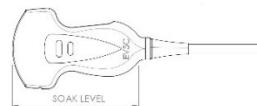


Figura 3: Nivel de cufundare EV5C

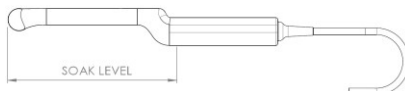


Figura 2: Nivel de cufundare EV9C

**PRECAUȚIE**

EN-C25



---

Nu imergeți transductorul peste nivelul de cufundare al acestuia.

---

## Lista substanțelor chimice aprobate pentru transductorii ExactVu™

### Prefață



#### Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15  
Markham, ON L3R 2N2, Canada  
+1.905.415.0030  
info@exactimaging.com



#### Emergo Europe

Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Țările de Jos



#### EDAP TMS

4, rue du Dauphiné  
69120 Vaulx-en-Velin  
Franța



### Mărci comerciale

Mărci comerciale Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® și ENZOL® sunt mărci comerciale înregistrate ale Johnson & Johnson.  
Revital-Ox™ este o marcă comercială înregistrată a Steris Corporation. Resert® este o marcă comercială înregistrată a Steris Corporation.  
Transeptic® este o marcă comercială înregistrată a Parker Laboratories Inc.  
UltrOx™ este o marcă comercială înregistrată CIVCO Medical Solutions.

### Numere de catalog Exact Imaging

- EV-29L: Transductor EV29L
- EV-9C: Transductor EV9C
- EV-5C: Transductor EV5C
- EV-SYS-220: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (100V)

### Informații privind versiunea

Sistem: Sistem cu micro-ultrasunete de înaltă rezoluție ExactVu™

Lista substanțelor chimice aprobate pentru transductorii ExactVu™, Revizia 1.9 (RO), *instrucțiuni originale*

