



Lista substanțelor chimice aprobate pentru transductoarele ExactVu™

Tipul substanței chimice	Denumirea chimică	Producător	Transductor transrectal			Transductor de suprafață	Timpul de contact validat
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Soluție de curățare	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minut
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minut
Dezinfectant de nivel înalt	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minute
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minute
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minute
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minute
Ștergere/ Pulverizare	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 secunde
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 secunde (sporicid)

* FDA a acceptat "Metricide Activated Dialdehyde Solution" (Soluție de dialdehidă activată Metricide) produsă de Metrex Research, Inc. (2,6% glutaraldehidă, reutilizare la 14 zile) ca fiind identic cu Cidex®.

Tabelul 1: Lista substanțelor chimice aprobate

Imaginile de mai jos prezintă *nivelul de cufundare* pentru transductori.



Figura 1: Nivel de cufundare EV29L



Figura 3: Nivel de cufundare EV5C

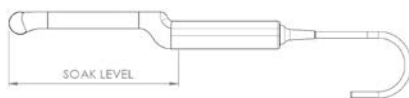


Figura 2: Nivel de cufundare EV9C

PRECAUȚIE
EN-C25



Nu imergeți transductorul peste nivelul de cufundare al acestuia.

Utilizați produsele de curățare și dezinfectare care sunt aprobate pentru utilizare în regiunea dvs.

NOTĂ



Urmați instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru utilizarea soluțiilor dezinfectante și de curățare.

Consultați *Care, Cleaning, and Use Guide* (Ghidul de îngrijire, curățare și utilizare) pentru transductorul dvs. cu privire la instrucțiunile de reprocesare a acestuia între utilizări și localizarea nivelului de cufundare a acestuia.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Țările de Jos



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Elveția



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia



UK Persoană
responsabilă

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Regatul Unit

Mărci comerciale

Mărci comerciale Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® și ENZOL® sunt mărci comerciale înregistrate ale Johnson & Johnson.
Revital-Ox™ este o marcă comercială înregistrată a Steris Corporation. Resert® este o marcă comercială înregistrată a Steris Corporation.
Transeptic® este o marcă comercială înregistrată a Parker Laboratories Inc.
UltrOx™ este o marcă comercială înregistrată CIVCO Medical Solutions.

Numere de catalog Exact Imaging

- EV-29L: Transductor EV29L
- EV-9C: Transductor EV9C
- EV-5C: Transductor EV5C
- EV-SYS-220: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (100V)

Informații privind versiunea

Sistem: Sistem cu micro-ultrasunete de înaltă rezoluție ExactVu™

Lista substanțelor chimice aprobate pentru transductorii ExactVu™, Revizia 2.1 (RO), *instrucțiuni originale*