

Ghid de referință rapidă pentru adaptorul reutilizabil nesteril PrecisionPoint EV29L

1. Reprelucrarea înainte de prima utilizare și înainte de fiecare utilizare

a. Curățare Cidezyme, 5 minute

- Utilizați o perie adecvată pentru canale/canule
- Spălați toate canalele/canulele cu soluție de curățare
- Clătiți timp de 5 minute după curățare

b. Sterilizare


•Sterilizare: Autoclavă de clasa B

- 134 °C (273 °F) timp de 3 min
- 132 °C (270 °F) timp de 4 min

c. Inspecție după preelucrare (fără fisuri, modificări de culoare sau deteriorări vizibile)

2. Atașarea la transductorul EV29L

Instalați adaptorul din plastic în partea superioară a tecii. Atașați fiecare braț al ghidajului PrecisionPoint la părțile laterale ale adaptorului. Ghidajul PrecisionPoint este de unică folosință și trebuie utilizat conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului.

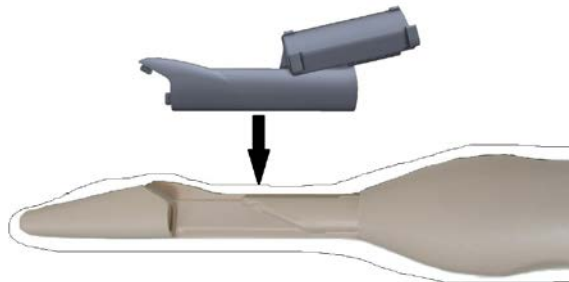

2a



2b



2c

3. Durata de viață utilă

Atunci când este utilizat cu grija corespunzătoare, adaptorul reutilizabil nesteril PrecisionPoint EV29L este proiectat pentru o durată de viață utilă de 3 luni sau 75 de cicluri de reprelucrare, oricare dintre acestea survine mai întâi.

Consultați următoarele manuale pentru instrucțiuni detaliate:

Pas	Manual	Secțiune din manual
1. Reprelucrarea (înainte de prima utilizare și înainte de fiecare utilizare)	Ghid privind întreținerea, curățarea și utilizarea pentru EV29L	Capitolul 4: Reprelucrarea Secțiunile 3.2, 3.3 și 3.5: Reprelucrarea ghidajelor pentru ace și a accesoriilor reutilizabile* * Instrucțiunile de curățare, sterilizare și inspecție se aplică și adaptorului reutilizabil PrecisionPoint EV29L.
2. Atașarea la transductorul EV29L	Ghid privind întreținerea, curățarea și utilizarea pentru EV29L	Capitolul 3: Pregătirea pentru imagistică Secțiunea 2.1.1: Atașarea ghidajului acului* * Aceste instrucțiuni se aplică și adaptorului reutilizabil PrecisionPoint EV29L.

Dacă aveți nevoie de **asistență tehnică** pentru sistemul cu micro-ultrasunete ExactVu™ sau pentru adaptorul reutilizabil PrecisionPoint EV29L, contactați serviciul de asistență tehnică Exact Imaging. Consultați <https://www.exactimaging.com/contact-us> pentru a găsi datele de contact pentru regiunea dvs.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Olanda



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Elveția

Persoana responsabilă în Regatul Unit
**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Regatul Unit



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Numere de catalog Exact Imaging

- EV-29L: Transductor EV29L
- EV-BIOGR-PP: Adaptor reutilizabil PrecisionPoint EV29L
- EV-SYS-220: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (100 V)