

Ghid de referință rapidă pentru ghidul acului reutilizabil/conectorul fișă EV29L

1. Reprocesați înaintea primei utilizări și după fiecare utilizare

a. Dezasamblați înainte de reprocesare

b. Curățare: Cidezyme, 5 minute

- Utilizați o perie adecvată pentru canale/canule
- Spălați canalele/canulele cu o soluție de curățare

c. Sterilizare

- Sterilizare: Autoclavă clasa B
 - 134°C (273°F) timp de 3 minute
 - 132°C (270°F) timp de 4 minute
- În alternativă (dacă autoclava nu este disponibilă) dezinfectie de înalt nivel: Cidex OPA, 12 minute
 - Spălați toate canalele/canulele cu dezinfectant




d. Inspectare după reprocesare

1. Asamblare/Dezasamblare*

2. Atașare la transductorul EV29L**

3. Ajustări ale software-ului

- Modul anestezie: Selectați opțiunea **35°** pentru unghiul ghidului acului
- Modul biopsie: Nu sunt necesare modificări

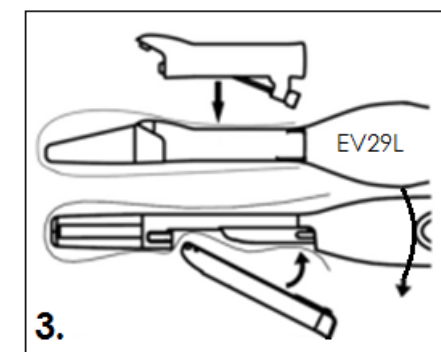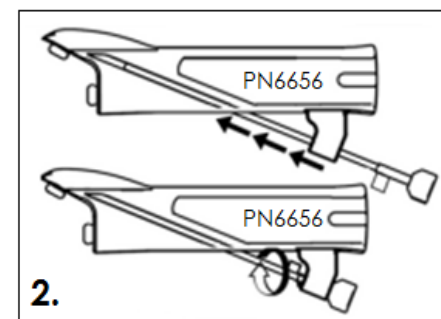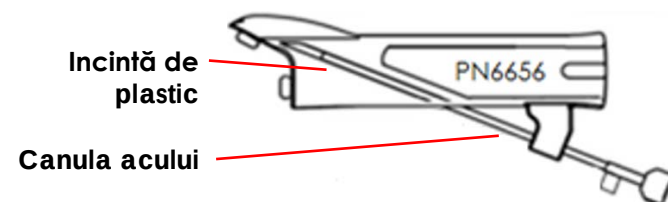

*Pasul acesta nu este necesar pentru utilizare sub formă de conector fișă (numai pentru proceduri imagistice).

**Instalați carcasa din plastic sub teacă pentru utilizare sub formă de conector fișă (numai pentru proceduri imagistice).

Consultați manualele următoare pentru instrucțiuni detaliate:

Pas	Manual	Secțiunea manualului
1. Reprocesare (Înainte de prima utilizare și la fiecare utilizare)	Ghid de îngrijire, curățare și utilizare pentru EV29L	Capitolul 4: Reprocesare Secțiunea 3: Reprocesarea ghidului acului transrectal reutilizabil EV29L
2. Asamblare/ Dezasamblare		Capitolul 2: Informații generale Secțiunea 2.2.2.3: Prepararea ghidului acului transrectal pentru utilizare
3. Atașarea la transductorul EV29L		Capitolul 3: Prepararea pentru achiziționarea de imagini Secțiunea 2.1.1: Atașarea ghidului acului
4. Ajustări ale software-ului	Manualul de funcționare și siguranță ExactVu	Capitolul 5: Utilizarea Modulului 2D Secțiunea 2.3.1: Utilizarea suprapunerii ghidului acului împreună cu transductorul EV29L

Dacă aveți nevoie de asistență tehnică pentru sistemul dvs. cu micro-ultrasunete ExactVu™ sau pentru ghidul acului transrectal reutilizabil EV29L, contactați Asistența tehnică folosind informațiile de contact pentru regiunea dumneavoastră la <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Țările de Jos



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Elveția

UK Persoană responsabilă
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Regatul Unit



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgia

Numere de catalog Exact Imaging

- EV-29L: Transductor EV29L
- EV-BIOGR: Ghidul acului transrectal reutilizabil EV29L, 18 GA
- EV-BIOG-R16: Ghidul acului transrectal reutilizabil EV29L, 16 GA
- EV-SYS-220: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Sistem imagistic cu micro-ultrasunete ExactVu™ (100V)