



Seznam odobrenih kemikalij za sonde ExactVu™

Vrsta kemikalije	Ime kemikalije	Proizvajalec	Transrektalno sonda			Površinska sonda	Potrjen čas stika
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Čistilo	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuta
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuta
Močno razkužilo	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minut
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	45 minut
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	×	✓	8 minut
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	×	✓	8 minut
Krpice/ razpršilo	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	×	×	×	✓	30 sekund
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekund (sporicidno delovanje)

* Ameriška Uprava za živila in zdravila FDA je sprejela sredstvo »Metricide Activated Dialdehyde Solution« proizvajalca Metrex Research, Inc. (2,6 % glutaraldehid, 14 dnevna ponovna uporaba) kot identično sredstvu Cidex®.

Preglednica 1: Seznam odobrenih kemikalij


Spodnje slike prikazujejo *dovoljeno globino namakanja* za sonde.



Slika 1: Dovoljena globina namakanja za EV29L



Slika 3: EV5C Dovoljena globina namakanja za

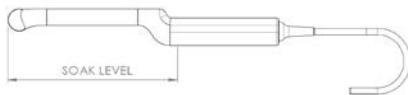

Slika 2: Dovoljena globina namakanja za EV9C

PREVIDNO

EN-C25



Sonde ne potopite globlje od dovoljene globine namakanja.

OPOMBA



Uporabljajte izdelke za čiščenje in dezinfekcijo, ki so odobreni za uporabo v vaši regiji.

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo razkužil in čistilnih sredstev.

Glejte *Navodila za nego, čiščenje in uporabo* vaše sonde za navodila glede ponovne obdelave sonde med posameznimi uporabami ter glede *dovoljene globine namakanja*.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nizozemska



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Švica



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgija

Združeno kraljestvo
Odgovorna oseba

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Združeno kraljestvo

Blagovne znamke

Blagovne znamke Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® in ENZOL® so registrirane blagovne znamke družbe Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ je blagovna znamka družbe Steris Corporation. Resert® je registrirana blagovna znamka družbe Steris Corporation.

Transeptic® je registrirana blagovna znamka družbe Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ je blagovna znamka družbe Civco Medical Solutions.

Kataloške številke Exact Imaging

- EV-29L: Sonda EV29L
- EV-9C: Sonda EV9C
- EV-5C: Sonda EV5C
- EV-SYS-220: Mikroultrazvočni slikovni sistem ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Mikroultrazvočni slikovni sistem ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Mikroultrazvočni slikovni sistem ExactVu™ (100 V)

Informacije o različici

Sistem: Visokoločljivostni mikroultrazvočni sistem ExactVu™

Seznam odobrenih kemikalij za sonde ExactVu™, Revizija 2.1 (SL), *prevod originalnih navodil*