

Seznam odobrenih kemikalij za sonde ExactVu™

Vrsta kemikalije	Ime kemikalije	Proizvajalec	Transrektalno sonda			Površinska sonda	Potrjen čas stika
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Čistilo	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuta
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	1 minuta
Močno razkužilo	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minut
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	×	45 minut
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	×	✓	8 minut
	UltrOx™	Medicinske rešitve CIVCO	✓	✓	×	✓	8 minut
Krpice/ razpršilo	Aérosol Transeptic®	Parker Laboratories	×	×	×	✓	30 sekund
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 sekund (sporadicno delovanje)

* Ameriška Uprava za živila in zdravila FDA je sprejela sredstvo »Metricide Activated Dialdehyde Solution« proizvajalca Metrex Research, Inc. (2,6 % glutaraldehid, 14 dnevna ponovna uporaba) kot identično sredstvu Cidex®.

Preglednica 1: Seznam odobrenih kemikalij

OPOMBA



Uporabljajte izdelke za čiščenje in dezinfekcijo, ki so odobreni za uporabo v vaši regiji.

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo razkužil in čistilnih sredstev.


Glejte *Navodila za nego, čiščenje in uporabo* vaše sonde za navodila glede ponovne obdelave sonde med posameznimi uporabami ter glede *dovoljene globine namakanja*.

Spodnje slike prikazujejo dovoljeno globino namakanja za sonde.


Seznam odobrenih kemikalij za sonde ExactVu™



Slika 1: Dovoljena globina namakanja za EV29L

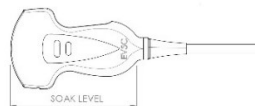

Slika 3: Dovoljena globina namakanja za EV5C

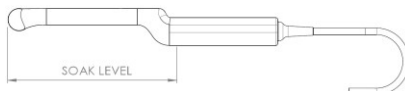

Slika 2: Dovoljena globina namakanja za EV9C

PREVIDNO

EN-C25



Sonde ne potopite globlje od dovoljene globine namakanja.

Seznam odobrenih kemikalij za sonde ExactVu™

Predgovor



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Amhem
Nizozemska



EDAP TMS
4, rue du Dauphiné
69120 Vaulx-en-Velin
Francija



Blagovne znamke

Blagovne znamke Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® in ENZOL® so registrirane blagovne znamke družbe Johnson & Johnson. Revital-Ox™ je blagovna znamka družbe Steris Corporation. Resert® je registrirana blagovna znamka družbe Steris Corporation. Transeptic® je registrirana blagovna znamka družbe Parker Laboratories Inc. UltrOx™ je blagovna znamka družbe Civco Medical Solutions.

Kataloške številke Exact Imaging

- EV-29L: Sonda EV29L
- EV-9C: Sonda EV9C
- EV-5C: Sonda EV5C
- EV-SYS-220: Mikroultrazvočni slikovni sistem ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Mikroultrazvočni slikovni sistem ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Mikroultrazvočni slikovni sistem ExactVu™ (100 V)

Informacije o različici

Sistem: Visokoločljivostni mikroultrazvočni sistem ExactVu™

Seznam odobrenih kemikalij za sonde ExactVu™, Revizija 1.9 (SL), prevod originalnih navodil

