

Guía de inicio rápido del Adaptador no estéril reutilizable PrecisionPoint EV29L

1. Reprocesamiento antes del primer uso y de cada uso posterior

a. Limpieza con Cidezyme durante 5 minutos

- Use un cepillo apropiado para todos los canales/cánulas
- Purgue todos los canales/cánulas con el producto de limpieza
- Enjuague durante 5 minutos tras la limpieza.

b. Esterilización


• Esterilización: Autoclave de clase B

- 134 °C (273 °F) durante 3 min
- 132 °C (270 °F) durante 4 min

c. Inspección después del reprocesamiento (ausencia de grietas, alteraciones de color o daños visibles)

2. Conexión al transductor EV29L


Monte el adaptador de plástico sobre la vaina. Acople cada brazo de la guía PrecisionPoint a los lados del adaptador. La guía PrecisionPoint es de un solo uso, y debe utilizarse según las instrucciones de uso del fabricante.

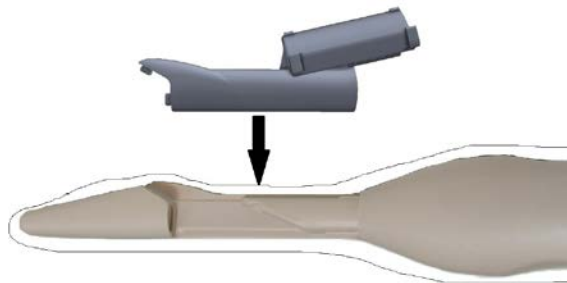

2a



2b

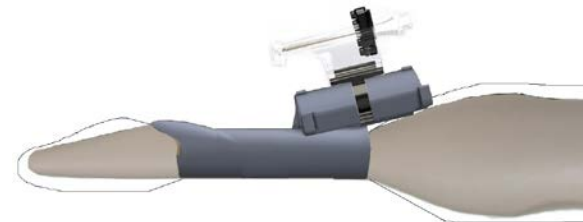

2c

3. Tiempo de vida útil

Si se utiliza con el debido cuidado, el adaptador no estéril reutilizable PrecisionPoint EV29L tiene una vida útil de 3 meses o 75 ciclos de reprocesamiento, lo que ocurra primero.

Consulte en los siguientes manuales las instrucciones detalladas:

Paso	Manual	Sección del manual
1. Reprocesamiento (antes del primer uso y de cada uso posterior)	Guía de cuidados, limpieza y uso del EV29L	Capítulo 4: Reprocesamiento Secciones 3.2, 3.3 y 3.5: Reprocesamiento de las guías de aguja y accesorios reutilizables* * Las instrucciones de limpieza, esterilización e inspección también se aplican al adaptador reutilizable PrecisionPoint EV29L.
2. Conexión al transductor EV29L	Guía de cuidados, limpieza y uso del EV29L	Capítulo 3: Preparación para la exploración por imágenes Apartado 2.1.1: Conexión de la guía de aguja* * Estas instrucciones también se aplican al adaptador reutilizable PrecisionPoint EV29L.

Si necesita **asistencia técnica** en relación con el microecógrafo

ExactVu™ o el adaptador reutilizable PrecisionPoint EV29L, póngase en contacto con el Servicio Técnico

de Exact Imaging. Visite la página <https://www.exactimaging.com/contact-us> para hallar la información de contacto de su región.



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canadá
+1 905 415 0030

info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
Países Bajos



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suiza

Persona Responsable en el Reino Unido

Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Reino Unido



Exact Imaging BVBA

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Bélgica

Números de referencia de Exact Imaging

- EV-29L: Transductor EV29L
- EV-BIOGR-PP: Adaptador reutilizable PrecisionPoint EV29L
- EV-SYS-220: Microecógrafo ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Microecógrafo ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Microecógrafo ExactVu™ (100 V)