
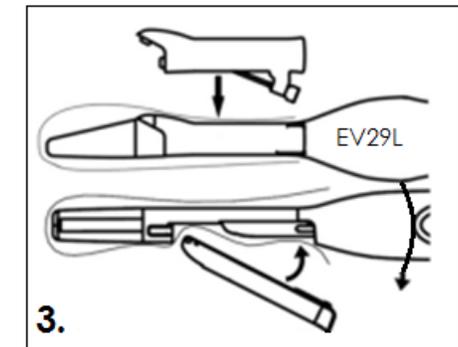
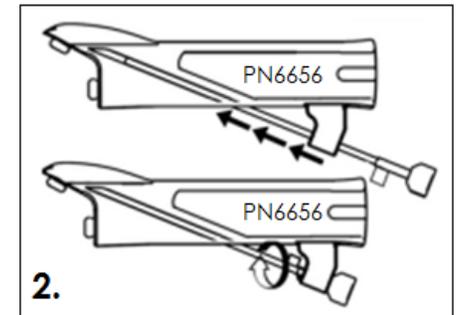


Guía de referencia rápida del obturador/guía de aguja reusable EV29L

1. Reprocesamiento antes del primer y de cada uso

- a. Desmontaje antes del reprocesamiento
- b. Limpieza: Cidezyme, 5 minutos
 - Use un cepillo apropiado para las acanaladuras y las cánulas
 - Enjuague todas las acanaladuras y cánulas con el producto de limpieza
- c. Esterilización
 - Esterilización: autoclave de clase B
 - 134 °C (273 °F) durante 3 min
 - 132 °C (270 °F) durante 4 min
 - Alternativamente (si no se dispone de autoclave), desinfección de alto nivel: Cidex OPA, 12 minutos
 - Enjuague todas las acanaladuras y cánulas con el desinfectante
- d. Inspección después del reprocesamiento

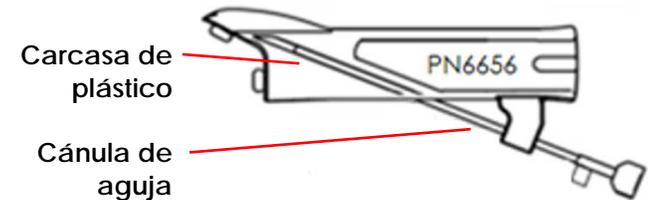

1. Montaje/desmontaje*

2. Conexión al transductor EV29L**

3. Ajustes del software

- a. Modo de anestesia: seleccione el ángulo de **35°** para la guía de aguja
- b. Modo de biopsia: no hacen falta cambios

*Este paso no hace falta si se usa como obturador (para procedimientos únicamente de exploración).

**Instale la carcasa de plástico debajo de la funda para usarlo como obturador (para procedimientos únicamente de exploración).

Consulte en los siguientes manuales las instrucciones detalladas:

Paso	Manual	Sección del manual
1. Reprocesamiento (antes del primer y de cada uso)	Guía de cuidados, limpieza y uso del EV29L	Capítulo 4: Reprocesamiento Apartado 3: Reprocesamiento de la guía de aguja transrectal reutilizable EV29L
2. Montaje/desmontaje		Capítulo 2: Información general Apartado 2.2.2.3: Preparación de la guía de aguja transrectal antes de usarla
3. Conexión al transductor EV29L		Capítulo 3: Preparación para la exploración Apartado 2.1.1: Conexión de la guía de aguja
4. Ajustes del software	Manual de seguridad y funcionamiento del sistema ExactVu	Capítulo 5: Uso del modo 2D Apartado 2.3.1: Uso de la guía de aguja superpuesta con el transductor EV29L

Si necesita **asistencia técnica** para el microecógrafo ExactVu™ o la guía de aguja transrectal reutilizable EV29L, póngase en contacto con el Servicio Técnico, comuníquese con el Soporte técnico utilizando la información de contacto de su región en <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Países Bajos



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suiza

UK Persona responsable
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Reino Unido



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Bélgica

Números de referencia de Exact Imaging

- EV-29L: Transductor EV29L
- EV-BIOGR: Guía de aguja transrectal reutilizable EV29L, 18 GA
- EV-BIOG-R16: Guía de aguja transrectal reutilizable EV29L, 16 GA
- EV-SYS-220: Microecógrafo ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Microecógrafo ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Microecógrafo ExactVu™ (100 V)