


ExactVu™ Probları için Onaylı Kimyasallar Listesi

Kimyasal Türü	Kimyasal Adı	Üretici firma	Transrektal Prob			Yüzey Probu	Onaylanmış Temas Süresi
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Temizleyici	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 dakika
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 dakika
Yüksek Seviye Dezenfektan	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 dakika
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 dakika
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 dakika
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 dakika
Silme/ Sprey	Transeptic® Sprey	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 saniye
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 saniye (sporisidal)


* FDA, Metrex Research, Inc. tarafından üretilen "Metricide Activated Dialdehyde Solution" ürününü (%2,6 glutaraldehit, 14 günlük yeniden kullanım) Cidex® ile aynı olarak kabul etmiştir.

Tablo 1: Onaylı Kimyasallar Listesi


Aşağıdaki görüntüler problemler için ıslatma seviyesini gösterir.

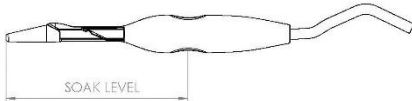

Şekil 1: EV29L Islatma Seviyesi

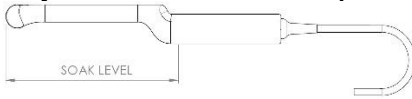

Şekil 2: EV9C Islatma Seviyesi

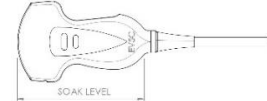

Şekil 3: EV5C Islatma Seviyesi

DİKKAT
EN-C25




Probu ıslatma seviyesinin ötesine batırmayın.



Bölgünüzde kullanım için onaylanmış temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini kullanın.
Dezenfektanlar ve temizleyiciler için üreticinin kullanım talimatlarına uyun.
Kullanımlar arasında yeniden işlemeye ilişkin talimatlar ve *ıslatma seviyesinin* konumu için lütfen probunuz için *Bakım, Temizlik ve Kullanım Kılavuzu* kısmına bakın.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com

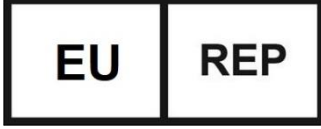

Emergo Europe
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem
Hollanda



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
İsviçre



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belçika



**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 –
UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Birleşik Krallık

Ticari Markalar

Exact Imaging ticari markaları:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® ve ENZOL® Johnson & Johnson'ın tescilli ticari markalarıdır.
Revital-Ox™, Steris Corporation'ın ticari markasıdır. Resert®, Steris Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
Transeptic®, Parker Laboratories Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
UltrOx™, CIVCO Medical Solutions'ın ticari markasıdır.

Exact Imaging Katalog Numaraları

- EV-29L: EV29L Probu
- EV-9C: EV9C Probu
- EV-5C: EV5C Probu
- EV-SYS-220: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (100 V)

Sürüm bilgileri

Sistem: ExactVu™ Yüksek Çözünürlüklü Mikro-Ultrason Sistemi
ExactVu™ Probları için Onaylı Kimyasallar Listesi, Revizyon 2.1 (TR), *orijinal talimatlar*

